


男女兼用 家庭用高密度焦点式 超音波美顔器  
アイスレディ/アイスダンディ ハイフン

# Notime icelady/icedandy HI-FUN

SKB-2208

# Notime

この度はHI-FUNをお買い上げいただき  
誠にありがとうございます。  
正しく安全にお使いいただくために  
初めてご使用になる際は、  
この取扱説明書をお読みください。  
また、お読みになった後はいつでも  
確認できるところに大切に保管してください。

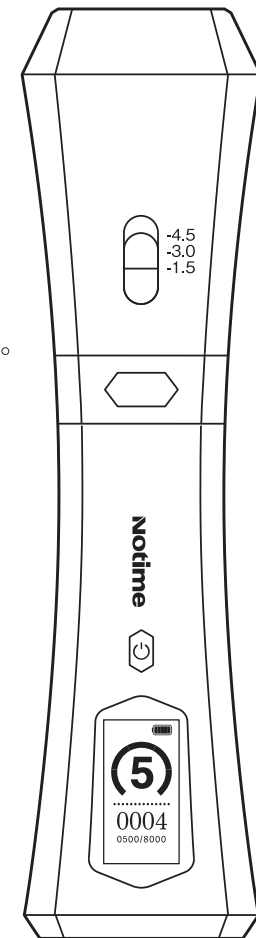

- 安全上の注意事項……………1
- 製品紹介……………6
- 製品仕様……………7
- 準備する……………8
- 表示内容……………10
- 使用方法……………11
- FAQ……………19
- アフターサービス……………21




■ 輸入・発売元  
株式会社ザ・マーチャント・オブ・ファクトリーズ  
〒155-0031 東京都世田谷区北沢4丁目27番10号  
お客様サポートセンター(平日10:00~17:00)  
電話番号 050-8880-1513

  
THE MERCHANT  
OF FACTORIES

## 安全上の注意事項

ご使用前に取扱説明書をよくお読みになり、安全上のご注意を十分に理解した上で正しくお使いください。取扱説明書に記載されている重要な安全事項および内容を遵守し、正しく操作してください。

## 警告表示の内容

	死亡または重傷を負う危険性のある内容です。
	死亡または重傷を負う可能性のある内容です。
	傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。 ※物的損害とは、家屋・家財及びペットにかかわる拡大損害を示します。

## 1.使用前

- 1.1\_皮膚を刺激するケアや施術を行った場合、3日間は本製品の使用をお控えください。
- 1.2\_本製品をご使用になる前は、洗顔料で洗顔を行い、お肌を清潔にしてください。
- 1.3\_洗顔後、肌表面の水分を拭き取ってください。
- 1.4\_お肌が乾燥した状態での使用を避けるため、美容ジェルや化粧水でお肌にたっぷりとうるおいを与えながらご使用ください。クリームやオイルなど油分を含む化粧品は超音波の妨げになりますので、使用しないでください。
- 1.5\_男性でヒゲの生えた方でも使用可能ですが、機器が肌に密着できないくらい長いヒゲの生えた方は短くお手入れをしてください。肌に機器が密着するかどうか確かめてからご使用ください。お肌同様にヒゲ下の肌にも美容ジェルや化粧水が届くようにたっぷりとうるおいを与えながらご使用ください。

## 2.使用中

- 2.1\_誤った操作で目や眼球に照射すると、失明などの重大な損傷を引き起こす恐れがありますので、目や眼球、唇などの周辺には使用しないでください。
- 2.2\_使用部位に美容整形フィラーまたは脂肪移植がある方のご使用は、かかりつけ医にご相談ください。
- 2.3\_肌に密着するようにあてて使用してください。肌に密着しないまま使用すると、肌にダメージを与える可能性があります。
- 2.4\_照射ヘッドを優しく肌に密着させるようにあてて、ご使用ください。同じ位置で何回も使用しないでください。同じ位置で繰り返し使用すると、やけどをする可能性があります。
- 2.5\_使用中は本体を分離しないでください。製品の故障原因になります。
- 2.6\_同じ位置への繰り返し照射を防ぐため、必ず1照射ごとに動かしながら使用してください。
- 2.7\_本製品は照射ヘッドが上向きの状態では使用できません。
- 2.8\_本製品は防水ではありません。洗面台や浴室でのご使用はお控えください。

## 3.使用后

- 3.1\_体に異常が生じた場合は直ちに使用を中止して、かかりつけの医師にご相談ください。
- 3.2\_使用后、当日は入浴やサウナや運動、また飲酒はお控えください。
- 3.3\_使用后1週間は刺激の強い、ピーリングなどのお肌のお手入れはお控えください。洗顔やお化粧などは普段通り行えます。
- 3.4\_照射部位が痒い場合は、触れたり、強く搔いたりしないでください。

## **注意** 必ず守ってください

- 1.取扱説明書の使用範囲外での使用は禁止されています。使用範囲を超えた場合は事故の原因となります。
- 2.他の美容機器と同時に使用しないでください。
- 3.浴室、サウナ、車内など高温多湿な場所での使用、保管はお控えください。
- 4.長期間ご使用していない場合は、もう一度注意事項を良くご確認ください。
- 5.ご使用の際は、他の美容機器やテレビなどの電子製品に近づけないでください。
- 6.製品の上に物、液体などを置かないでください。
- 7.ぬれた手でアダプターをコンセントから抜き差ししないでください。
- 8.必ず本製品付属のType-C充電ケーブルを使用してください。
- 9.落としたり、ぶつけたりしないでください。
- 10.鋭利な物を使用して機器に触れないでください。製品の故障原因になります。
- 11.ケガをしている部分、治療中の部分への使用はできません。  
また、皮膚病がある場合も使用はできません。
- 12.金属物質へのご使用はできません。
- 13.照射口の黒い膜は耐熱膜ですので剥がさないでください。
- 14.絶対に分解しないでください。
- 15.本体をアルコール、シンナー、除光液またはスプレーなどの液体で拭かないこと。本体の表面がはがれたり破損する可能性があります。
- 16.小さなお子様やペットや動物などに使用しないでください。  
思わぬけがの原因となります。
- 17.業務用としての使用はしないでください。

## **禁止** ご使用にあたって

- キッチンや暖房機器など高温になる場所や、浴室や脱衣所など多湿になる場所で充電または使用をしないでください。本製品はバッテリーを内蔵していますので、発熱、発火、破裂の原因となります。
- 乳幼児や子供、またはペットの手に届く場所に置かないでください。
- 引火性のもの(アルコール、シンナー、除光液またはスプレー)の近くで使用しないこと。火災や感電、けがなどの原因となります。

## **禁止** ご使用にあたって

- Type-C充電ケーブルから本体が宙にぶら下がった状態で充電をしないでください。
- 子供など、自分で意思表示ができない方、体の不自由な方の使用は避ける。思わぬ事故やけがの原因となります。
- 異臭や発熱など本体に異常を感じた場合は使用を中止してください。破損、発火の原因となります。
- Type-C充電ケーブルを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、捻ったりまたは束ねたりしないこと。また、重いものを乗せたり、挟み込んだりすると、Type-C充電ケーブルが破損し、火災、感電の原因となります。
- 本体のヘッド部分以外や底面の充電口を濡らしたり、丸洗いをしないでください。浴室またはシャワーの近くでは使用しないでください。感電、ショート、火災の原因となります。
- Type-C充電ケーブルや差込口に水が付着していないことを確認してから充電してください。感電、ショート、火災の原因となります。
- 使用しない時やお手入れをする際は必ず電源をオフにしてください。感電、ショート、火災の原因となります。
- 充電時は、交流100~240Vのアダプタを使用すること。Type-C充電ケーブルは本体充電口にしっかりと差し込んでから充電してください。火災、感電や事故の原因となります。
- Type-C充電ケーブルを抜く時は、必ず先端のプラグを持って引き抜くこと。濡れた手で抜き差しはしないこと。感電、ショートや火災の原因となります。
- 充電が完了したら、本体からType-C充電ケーブルを離してください。濡れた手で抜き差しはしないこと。感電、ショート、火災の原因となります。
- 充電が完了したら、Type-C充電ケーブルを抜いてから使用してください。
- 万が一、異常が発生した場合はType-C充電ケーブルをすぐに抜いて充電を中止してください。本体の異常・異音、煙や臭いがする場合は使用しないでください。
- 火元の近く、直射日光の下、車内、浴室などの高温多湿の場所に放置しない。また、加熱装置に近づけない。過熱、火災、破裂の原因となります。

## 下記の方は使用しない

### 警告

1. 子供や妊娠中の方、また生理中の方。
  2. 治療中の病気や傷がある方、また傷跡が目立つ方。
  3. 重症の皮膚病、ニキビ、アトピー性皮膚炎の方、アレルギー体質の方。
  4. 使用部位に整形などで金属やシリコン、プラスチックなどの埋め込み手術を受けた方。
  5. 肌や身体の病気がある方、また体調不良の方。
  6. アルコールや睡眠薬を飲んでいる方。
  7. 皮膚を刺激するケアや施術を行った場合、3日間は本製品の使用をお控えください。
- ※上記以外の方でも、体に異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、かかりつけの医師にご相談ください。

### 危険


1. 人工心臓機器を体内に移植している方。
2. 心肺装置などの生命維持医療機器を使用している方。
3. 心電図モニターなどの医療機器を装着している方。
4. 体内に金属、プラスチック、シリカゲルが入っている方。

## 製品の保管方法

1. ご使用后、必ず残ったジェルをティッシュペーパーなどで拭き取ってください。
2. 照射ヘッドと本体の落下を避けてください。
3. 長期間使用しない場合、本体、照射ヘッド、充電器を分けて保管してください。
4. 長期間使用していない場合は、正常に使用できるか確認してください。
5. 日に当たる場所に置かないでください。
6. 化学薬品やガスなどの危険物と一緒に保管しないでください。
7. 製品内の液体の凍結を防ぐため、0°C未満および50°Cを超える場所では保管しないでください。
8. 高温多湿な場所での保管はしないでください。


## 製品紹介

### 本体

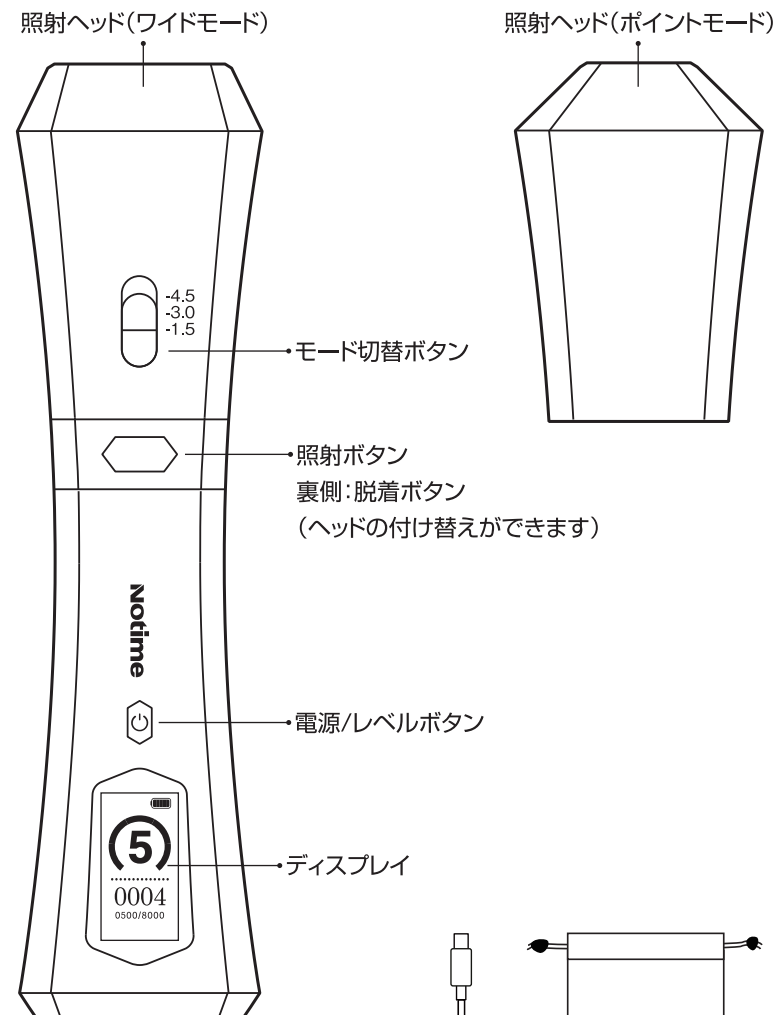

### セット内容

- 本体×1
- 照射ヘッド(ワイドモード)×1  
※本体にセットした状態でお届け
- 照射ヘッド(ポイントモード)×1
- Type-Cケーブル×1
- 収納袋×1

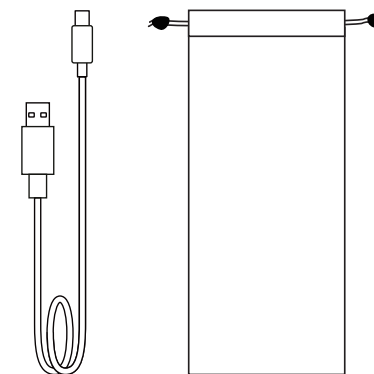


## 製品仕様

品名	家庭用高密度焦点式超音波美顔器		型番	SKB-2208
サイズ	約)36x50x200mm			
重量	本体+ポイントモード:約)170g / 本体+ワイドモード:約)230g			
定格電力	TypeC 定格電圧:AC100-240V 50/60HZ 0.35A; 定格電流:DC5V 2A			
出力電圧	3.7V	出力電流	≤10A	
待機電流	≤30uA	電池容量	3300mAh	
充電回数	約300回	充電時間	約3時間	
安全装置	無操作で1分30秒後自動シャットダウン			
認証	RoHs, CQC, PSE	製造国	中国	

## 照射ヘッドの付け替え

### 照射ヘッドの付け替えの注意事項


照射部位に合わせて、照射ヘッドを付け替えてください。  
照射ヘッドを外す時は、脱着ボタンを押しながら、ひっぱります。  
照射ヘッドを付ける時も脱着ボタンを押しながら装着します。  
照射部位に合わせた使用方法は本書11～18ページをご確認ください。

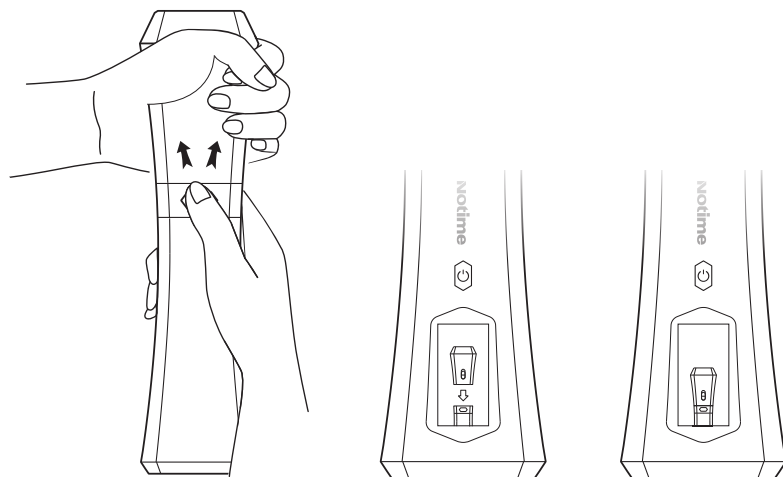

## 準備する

### 1.電源を入れる前の準備

本体を付属のケーブルで充電する。  
本体の充電が完了している事を確認する。  
本体から充電ケーブルを外す。

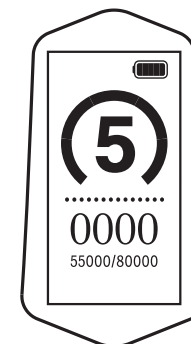

### 2.電源入切

電源/レベルボタンを2秒長押し、  
電源ONは「ビッ」と1回鳴り、電源OFFは「ビピッ」と2回鳴る。


※照射ヘッド(ワイドモード)を装着している状態での起動音は「ブブ～」と鳴りますが、故障ではありません。

### 3.レベル調整

3-1.電源入状態で、“Notime”を表示後、操作画面に入る。

3-2.レベルは全部で5段階、電源ボタンを短押し、レベルを調整する。

#### レベル1-5

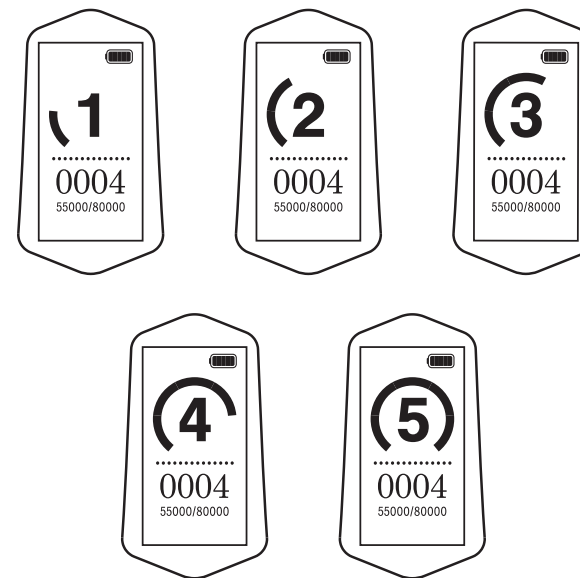

3-3.照射ボタンを1回押すと、1回照射する。

3-4.ワイドモード照射:1回照射で10点の照射:線型方式。

3-5.ポイントモード照射:1秒に1回1点の照射:点型方式。


## 4.モード切替

4-1.ワイドモード照射:【1.5】、【3.0】、【4.5】の3つモードを切り替える。


4-2.ポイントモード照射:【1.5】モードのみ。

※3つのモードは超音波の長さが異なります。

使用部位ごとの適切なモードについては11~18ページの使用方法をご確認ください。

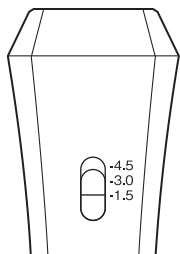

ワイドモード照射  
【1.5】、【3.0】、【4.5】の3つのモード

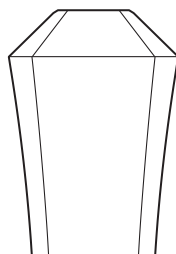


ポイントモード照射  
【1.5】モード

## 5.充電


充電を開始すると、電池表示目盛が点滅します。

電池表示の目盛が全部点灯すると充電完了です。(約3時間)

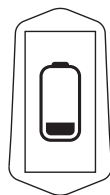


## 6.電池の残量がなくなると、自動的にシャットダウン

### ディスプレイ表示説明

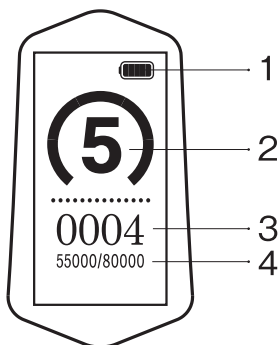

ポイントモードディスプレイ表示

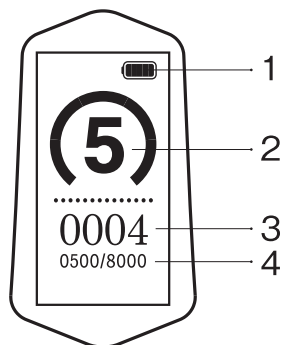

ワイドモードディスプレイ表示

## 1.電池表示

5段階表示



## 2.レベル表示

レベル表示1-5段階(8ページのレベル調整を参照)

## 3.使用回数の表示

使用回数のカウントは電源を切ると0に戻ります。

## 4.照射ヘッド残り使用回数の表示

右側の数字は照射ヘッドの総使用回数(固定数)


左側の数字は照射ヘッドの残り使用回数

(残り使用回数が0になると新しいヘッドの購入が必要です)


各照射ヘッドの総使用回数

ポイントモード:80000回/ワイドモード:8000回

## 表示内容

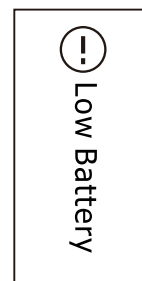

電池残量が少ない  
▶充電してください

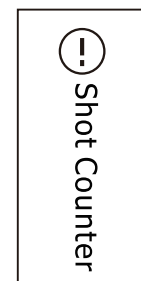

使用回数確認表示  
▶照射ヘッドの残り照射回数がなくなった時の表示



照射ヘッド・本体が高温  
▶一定時間おいてからご使用ください。

## 使用方法

### ご自身に合った使用方法

1. お顔全体のケアだけではなく、ご自身のケアしたい部位のみに照射することも可能です。照射方法は13～18ページの部位ごとの使用方法をご覧ください。
2. 鏡を見ながら照射部位をご確認の上、使用禁止部分を避けてご使用ください。
3. こめかみ、ほほ骨、エラ付近は痛みを感じやすい部位です。レベル1からお試してください。
4. ほうれい線や目元のシワは片手で伸ばしながらご使用ください。(使用禁止部位を避けてください)
5. あご下や首周りにご使用になる際は仰向けになり、お顔を上に向けた状態でご使用いただくと照射有効角度が確保されます。その際手鏡をご用意頂くと照射部位を確認しやすいです。ご使用の際は機器、手鏡の落下に十分ご注意ください。
6. 使用後の入浴や運動、飲酒はお控えください。また一時的にお肌が乾燥しやすい状態になります。美容ジェルや化粧水などでお肌にうるおいを与え、こまめな水分補給を行ってください。

### ⚠ 照射ヘッドについての注意事項

照射ヘッドには液体が入っております。液体が照射口に接触するように、製品の底部を上げるように斜めにしてご使用ください。さらに照射ヘッドがお肌に密着するように、使用することで超音波エネルギーがお肌に伝達することができます。


### 使用禁止部分

眉間、目、口周り、  
下あご骨、のどぼとけラインは  
**絶対使用禁止。**

皮膚が薄い部位または、  
痛みが強いと感じた時は  
**レベルを1**にしてください。



### モードの切り替え

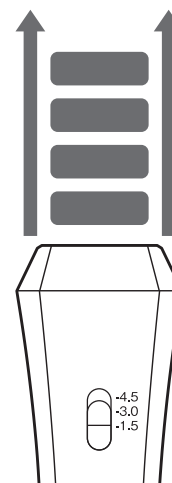




部位ごとに指定のモードに  
切り替えてご使用ください。

ワイドモードは左図のように  
**1回の照射毎に動かしながら**  
使います。

1度照射ボタンを押すと音が鳴ります。  
鳴り止んだら次の箇所に動かし照射ボ  
タンを押すの繰り返しです。ポイント  
モードは「ピッ」という音で次に動かし  
てください。

### 使用時の手持ち角度

照射ヘッド部分を下向きにしてご使用ください。

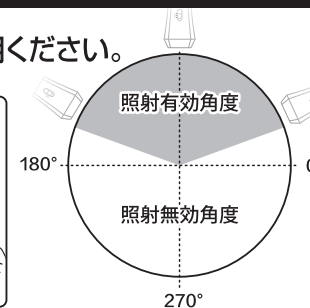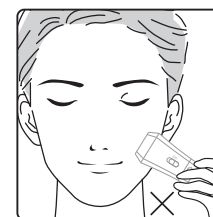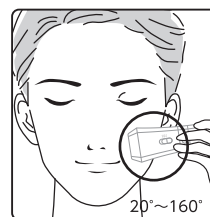

## 1.お顔への使用方法

イラストの  部分は禁止部位です。

### 1-1 頬(下から上)



ワイドモード1.5、3.0、4.5の各モードを下から上へ順に5回ずつ計15回軽く押し当てるように照射する。

### 1-3 頬(対角線方向)




ワイドモード1.5、3.0、4.5の各モードをフェイスラインから目の下へ順に5回ずつ計15回軽く押し当てるように照射する。

### 1-2 頬(内から外)



ワイドモード1.5、3.0、4.5の各モードを内から外へ順に5回ずつ計15回軽く押し当てるように照射する。

### 1-4 こめかみ

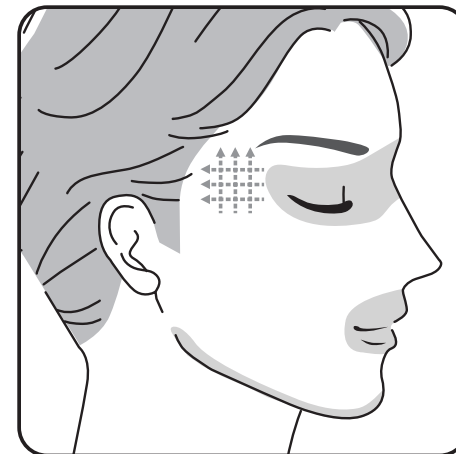

ワイドモード3.0で下から上へ順に5回、内から外へ順に5回照射する。(注意: 眼球部分は絶対使用禁止)




## 1.お顔への使用方法

### 1-5 ひたい



ワイドモード3.0で左右各10回照射する。  
(注意:眉間は絶対使用禁止)

### 1-6 顔全体

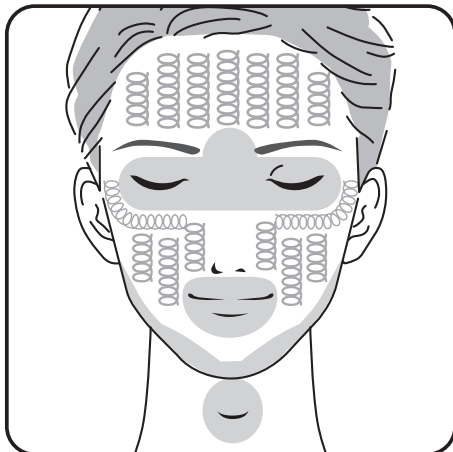

ワイドモード1.5で使用禁止部位を避けて、顔全体に照射する。  
細かい部分はポイントモード1.5で照射する。

## 2.目周辺の使用方法

### 2-1 目の下



ワイドモード3.0で左右各10回照射する。  
(注意:眼球部分は絶対使用禁止)

### 2-2 目の周辺




ポイントモード1.5で目の下からこめかみの  
順に軽く押し当てるように照射する。

### 3.首の使用方法


イラストの  部分は禁止部位です。

#### 3-1 あご

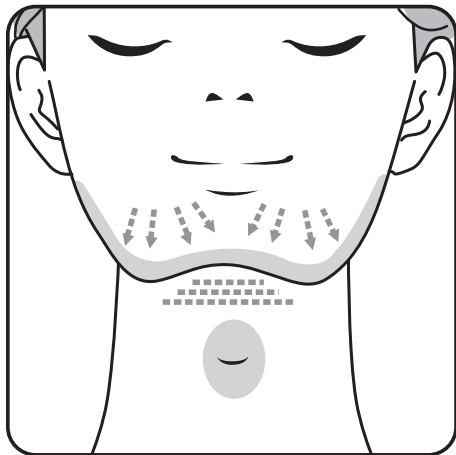


ワイドモード4.5であご部分に1~3回照射する。  
(注意: のどぼとけ、下あご骨部分を避けてください)

#### 3-2 首

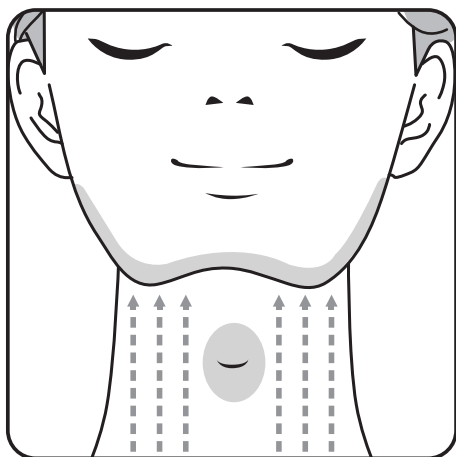

ワイドモード3.0で10回照射する。  
(注意: のどぼとけ部分を避けてください)

#### 3-3 首

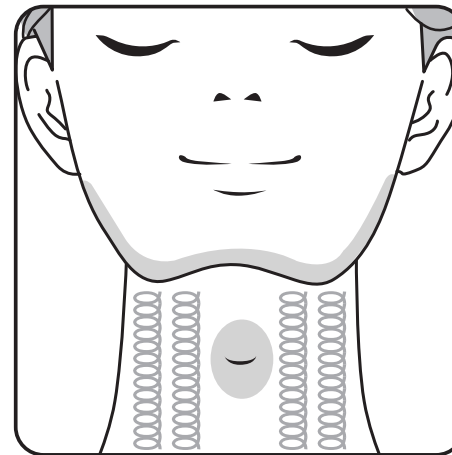

ワイドモード1.5で使用禁止部位を避けて照射する。  
(注意: のどぼとけ部分は使用禁止)。  
細かい部分はポイントモード1.5で照射する。

# FAQ

こんな時	解決方法
起動しない	バッテリー残量をご確認の上、製品の電源ボタンを2秒以上押し続けてください。
充電できない	ケーブルプラグやUSB接続部分がしっかり接続されているかご確認ください。
充電中に使用できますか?	ご使用いただけません。
充電完了まで何時間かかりますか?	充電完了までは約3時間程度です。
本製品はどうやって使用しますか?	洗顔後、顔の水分を取り除き、保湿ジェルをたっぷり塗って肌に密着させてご使用ください。詳しくは本書11ページの使用方法をご覧ください。
どれくらいの頻度で使用できますか?	2週間に1度の使用をお勧めしております。肌の状態に合わせて使用頻度を調整してください。
残りの使用回数を知りたい	スタンバイ状態時に使用回数と残り回数をディスプレイでご確認いただけます。
保証期間はいつまでですか?	お買い上げ日から1年間保証いたします。詳しくは本書21ページのアフターサービスをご覧ください。
本体が熱い	使用中、製品が熱を持つ場合がございます。熱さを感じる場合は、電源を切り、本体が冷めてからご使用ください。
使用中に変な音がする	使用中に音がすることは正常ですが、音が大きすぎると思われる場合は、使用を中止して販売者にご連絡ください。
モードは何種類ですか?	ワイドモードは1.5/3.0/4.5の3つのモードがあります。ポイントモードは1.5モードの1つです。
レベルは何種類ですか?	各モードに1～5のレベルがあります。1:低～5:高です。

こんな時	解決方法
痛みはありますか?	人それぞれ痛みの感覚は異なります。自分に合ったレベルに調整してください。レベル1から始めましょう。
使用後の製品のお手入れは?	ペーパータオルや、柔らかい布で製品を拭いてください。
電池残量の確認方法は?	電源を入れ、ディスプレイの右上に表示されます。
保管方法	直射日光の当たる場所には置かないでください。本書5ページの製品の保管方法をご参照ください。
顔以外の部分は使用できますか?	本取扱説明書に記載されている使用可能部位以外には使用しないでください。
妊娠中に使用できますか?	取扱説明書の禁止事項をご参照ください。
日常生活に影響ありますか?	肌表面にダメージを与えることなく、日常生活での洗顔やメイクに支障はありません。
照射ボタンを押しても反応がない	照射ヘッドの表面にジェル状化粧品を塗り、製品を逆に持ち(USB充電ポートを上に向けます)、製品の電源を入れ、照射ボタンを押して、ジェル状化粧品が飛散するかどうかを確認します(飛散した場合、製品が正常に動作することを証明します)。製品の最適な使用角度は、製品の底部が上向き20～160度に傾いている状態です。製品を正しい角度で、肌に密着する状態で使用してください(使用方法を確認してください)。
照射ヘッドの残り使用回数が0になりました	新しい照射ヘッドが必要です。販売店もしくは発売元にお問い合わせください。

# アフターサービス

## 廃棄について

本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

## 保証について

通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします(消耗品、付属品は除く)。保証期間を過ぎた後の故障については、実費(送料等含)にて修理させていただきます。保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。

### 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
- ご転居される場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- 保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
  - (イ)使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
  - (ロ)お買い上げ後の転倒・落下および輸送・移動などによる故障および損傷。
  - (ハ)火災・地震・水害、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
  - (ニ)接続する他の機器の異常により生ずる故障および損傷。
  - (ホ)消耗品、付属品などの部品交換の場合。
  - (ヘ)一般家庭以外(例えば業務用の長時間)に使用された場合の故障および損傷。
  - (ト)車両・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
  - (チ)転売品及びリサイクル中古品など使用者の瑕疵が特定できない場合。
  - (リ)保証書のご提示がない、お買い上げ年月日・お客様名・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

### ■ 輸入・発売元

株式会社ザ・マーチャント・オブ・ファクトリーズ  
〒155-0031 東京都世田谷区北沢4丁目27番10号

お客様サポートセンター  
(平日10:00~17:00)

電話番号

**050-8880-1513**