

Exidéal 保証書

本書は、ご購入日から下記期間中に故障が発生した場合には、保証書下に記載の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただいた個人情報の利用目的は、保証書下に記載しておりますのでご参照ください。

品 番	
製造番号	
保証期間	本体ご購入日より1年間
ご購入日	年 月 日
お客様	郵便番号
	ご住所
	お名前
	電話番号
購入先	

【無料修理規定】

- 1) 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正しい使用状態で保証期間内に故障した場合、本保証書の記載内容に基づき無料修理させていただきます。
 - 無料修理をご依頼になる場合、ご購入先に本書をご持参ご呈示いただきお申し付けください。なお、持ち込みではなく購入先もしくは弊社カスタマーサービスへ直接送付された場合、送料はお客様負担となります。
 - 購入先に無料修理を相談されない場合、弊社カスタマーサービスへご相談ください。
- 2) ご転居の場合の修理相談につきましては、購入先または弊社カスタマーサービスへご相談ください。
- 3) ご贈答品などで本保証書に記載の購入先で無料修理を受けられない場合は、弊社カスタマーサービスへご相談ください。
- 4) 保証期間内でも次の場合には、原則として有償とさせていただきます。
 - 使用上の誤りおよび不当な修理、改造による故障及び損傷
 - お買い上げ後の保管場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷
 - 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
 - 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障および損傷
 - 本書のご呈示がない場合
 - 本書にご購入日および購入先名、お客様名の記入のない場合、または字句を書き換えられた場合
- 5) 消耗品の交換は有償とさせていただきます。
- 6) 本書は、日本国内でのみ有効です。
- 7) 本書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

■お客様の個人情報の取り扱いについて他

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は、保証期間内の無料修理対応および安全点検などに利用させていただきます。ご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書を発行している保証責任者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な点がございましたら、購入先もしくは弊社カスタマーサービスへお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後のアフターサービスについては、取扱説明書の「保証について」をご参照ください。

保証書付

取扱説明書 / 保証書

Exidéal



表紙	
P.1-P.2	安全上のご注意
P.3-P.4	同梱内容 / 各部の名称と機能
P.5-P.6	エクスイディアルの特長
P.7-P.8	エクスイディアル操作手順 10ヶアサポートプログラム
P.9-P.10	10ヶアサポートプログラム
P.11-P.12	ウェイクアップモード / Q&A
P.13-P.14	トラブルシューティング 保証について
裏表紙	Exidéal保証書

日本製



この度は、当社製品「Exideal」をご購入いただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよく読んでから本製品を使用していただきますようお願い申し上げます。
また、この取扱説明書の裏面に保証書が付いておりますので、必ず大切に保管してください。

使用前に、必ずこの「安全上のご注意」をお読みいただき、ご理解のうえ安全に正しくお使いください。

- この注意事項は、本製品を正しく使用いただき、使用される方や他の人への危害、損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は、次のように区分しています。

注意区分について

危険 人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容

警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

注意 人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容

図記号について

○ 禁止の行為を表示する記号

● しなければいけないことを表示する記号

危険

ペースメーカーや心電計など医療用電子機器をお使いの方は、医療用電子機器の誤作動をまねく恐れがありますので、使用しないでください。

警告

ゴーグル着用 本製品を使用する際にはゴーグル着用を必要とするプログラム、不要のプログラムに関わらず、必ず目を閉じて照射してください。またエクスイディアル専用ゴーグル以外は使用しないでください。

本製品を使用する際は、LED光を直接のぞき込まないでください。

顔や身体の美肌目的以外での使用や、破損した本製品を使用しないでください。使用に際して肌および体調に不安のある方は、使用前に医師にご相談ください。

下記の皮膚トラブルをお持ちの方、および該当する肌には、使用しないでください。肌のトラブルが悪化する原因になります。 <ul style="list-style-type: none"> ・光過敏症 ・皮膚病、あるいは皮膚に関する既往症をお持ちの方 ・皮膚炎(アトピー性皮膚炎、接触性皮膚炎、過度の日焼けなど) ・金属アレルギー ・ニキビや吹き出物で化膿を伴う部位 ・湿疹、腫れもの、およびイボ(ウイルス性など) ・紫斑 ・黒皮症 	下記の疾病に該当する方は、使用しないでください。 思わぬ事故や、肌および身体のトラブルが生じる原因になります。 <ul style="list-style-type: none"> ・急性疾患 ・血液疾患(出血性疾患、血友病など) ・異常血圧で治療中ないしは経過観察中の方 ・有熱性疾患 ・悪性腫瘍 ・伝染病(感染性疾患) ・内臓疾患 ・顔面の神経障害 ・交通事故などによる頭部および眼部的後遺症 ・骨に異常のある方(骨粗しょう症、骨折など) ・急性疼痛性疾患(捻挫、肉離れなど)
--	---

禁止 下記に該当する肌や部位には、使用しないでください。思わぬ事故や、肌および身体のトラブルが生じる原因になります。 <ul style="list-style-type: none"> ・敏感肌 ・切り傷 ・口内や陰部、その他の粘膜など 	下記に該当する方は、使用しないでください。 思わぬ事故や、肌および身体のトラブルが生じる原因になります。 <ul style="list-style-type: none"> ・光の点滅に反応するてんかん発作のある方 ・アレルギー体質 ・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている方 ・生理中の方 ・妊娠中や、産後1ヵ月、および授乳中の方 ・飲酒後や薬(特に睡眠を誘う薬)を服用中の方 ・疲労の激しい方、体調のすぐれない方、および安静を必要とする方 ・体温38℃以上(有熱期)の方
---	---






コードや専用ACアダプターに傷みや異常な発熱がある場合、またコンセントへの差し込みがゆるい場合などは、使用しないでください。火災や感電、ショート、火傷の恐れがあります。

コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重い物を載せたりしないでください。火災や感電、ショート、火傷の恐れがあります。



必ず交流100-240Vのコンセントで使用してください。また本製品専用ACアダプターを必ず使用してください。火災や感電、故障の原因になります。

イヤリングやネックレスなどの貴金属類は、外して使用してください。事故やトラブルの原因になります。メガネやコンタクトは外して使用してください。事故やトラブルの原因になります。

警告

 禁止	本製品を浴室内や湿気の多いところに保管したり、水のかかりやすいところ(洗面台の上など)に置かないでください。劣化による火災や感電の恐れがあります。
	火への投入や加熱、高温での使用、放置をしないでください。発熱や発火、破裂の原因になります。
	引火性のもの(アルコール・シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど)の近くで使用しないでください。火災や感電、ケガの原因になります。
 プラグを抜く	次のような場合、使用を中止し電源を切り専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。火災や異常出力による火傷の恐れがあります。 <ul style="list-style-type: none"> ●本製品からの発熱 ●本製品の異常発熱 ●本製品からの異音 ●本製品からの異臭 など
 分解禁止	弊社の指定する修理技術者以外は、改造や分解、修理は絶対にしてしないでください。発火や異常動作によるケガの恐れがあります。
 水濡れ禁止	水につけたりしないでください。感電やショートの恐れがあります。
 厳守	使用しないとき、お手入れをするときは必ず電源を切ってください。感電やショート、発火の原因になります。
	使用時以外は、専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。
	濡れた手で専用ACアダプターを抜き差ししないでください。
	本製品には非常に強い赤外線照射パルスプログラムが含まれているので、テレビやエアコンなど赤外線を使ったリモコン機器が動作しない場合があります。万が一、誤作動やリモコンの使えない状況が発生した場合は、本製品の電源をお切りください。
	子供の手の届かない場所に保管してください。事故やトラブルの原因になります。
	ペットおよび幼いお子様による使用や、本製品で遊ばせるなどしないでください。事故やケガの原因になります。
	使用時間や使用頻度は、取扱説明書に従ってください。事故やトラブルの原因になります。
	痛感や不調を感じたときは、使用をやめてください。事故やトラブルの原因になります。

注意

 禁止	脱毛や剃毛処理をした当日は、同部位へ使用しないでください。腫れや赤みが出る恐れがあります。
 厳守	LED照射パネルを90度以上の角度に開いてご使用の場合は、顔などに落下して危険ですので必ずベースプレートに手を添えてご使用ください。また、本製品を顔より高い位置に設置してLED照射パネルを90度以上の角度に開いてご使用されるのは非常に危険です。
	本製品を落としたり、投げつけたり、強い衝撃を与えないでください。事故やトラブルの原因になります。
	本製品の上に物を載せないでください。
	専用ACアダプターを抜くときは、必ずACアダプターを持ち、ケーブルを引っ張らないように抜いてください。
	次のような場所には、保管しないでください。 <ul style="list-style-type: none"> ●直射日光の当たる場所 ●湿気の多い場所 ●粉塵の多い場所 ●引火の危険のある場所 ●風雨にさらされる場所 ●高温または零下の場所 ●化学薬品、ガスの発生する場所 ●振動の激しい場所
	アルコール・シンナー・ベンジン・アルカリ性洗剤・漂白剤・中性洗剤などの薬品や殺菌・消毒剤で拭かないでください。変形・変色・ひび割れなどの故障や破損の原因になります。

※この取扱説明書は、ご使用になる方がいつでも読むことのできる場所に保管してください。
 ※間違った使用方法や収納方法、保管方法により故障した場合は、保証期間内であっても保証対象外となり有償修理になります。

同梱内容・各部の名称と機能

1 同梱内容 下記が同梱された商品内容です。ご使用前に必ず内容をご確認ください。




■同梱商品

- 1 エクスイディアル本体
- 2 エクスイディアル専用収納ケース
- 3 エクスイディアル専用ゴーグル (クリーニングクロス付)
- 4 エクスイディアル専用ゴーグルケース
- 5 エクスイディアル専用ACアダプター

2 本体各部名称




【コントロールパネル名称】

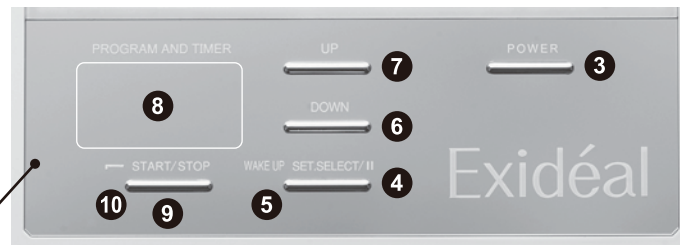

- 3 POWER(起動)ボタン
- 4 SET,SELECT/ II ボタン
WAKE UP(目覚まし)設定・メニュー選択・照射一時停止
- 5 WAKE UPランプ
- 6 DOWN ボタン プログラム選択・タイマー設定用
- 7 UPボタン プログラム選択・タイマー設定用
- 8 表示モニター(プログラム、タイマー表示)
- 9 START/STOP ボタン スタート及びストップボタン
- 10 START/STOPランプ


【LED照射パネル名称】

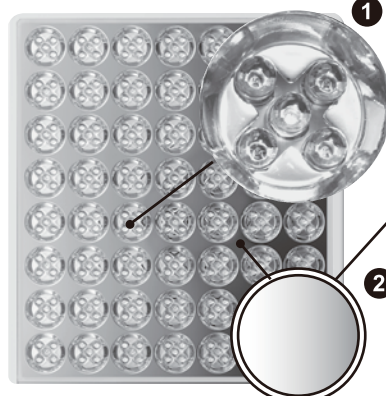

- 1 LEDサークル(LED5個内蔵)
- 2 ミラーパネル(鏡面)

3 コントロールパネルの機能

- 3 [POWER(起動)]ボタン
POWER(起動)ボタンを押すと電子音が鳴り本製品が起動し、全ての操作が可能になります。起動中に【POWER(起動)]ボタンを押すことにより、動作中のプログラムを停止することが可能です。
- 4 [SET,SELECT/II] ボタン
SELECTボタンには、多機能用途があります。
(1)照射プログラム設定とタイマー設定機能
(2)WAKE UP設定への切り替え機能
(3)WAKE UPタイマー設定時の時/分切り替え機能
(4)プログラムの一時停止、再スタート機能
- 6 [UP/DOWN]ボタン
UPボタンは、照射プログラム、タイマー、WAKE UP設定時に使用します。
UPボタンは一度押す度に表示のプログラムナンバーを次のプログラムナンバーにすすめ、DOWNボタンは一度押す度に表示のプログラムナンバーを前のプログラムナンバーに戻す(P01~P10の範囲)ことが可能です。
(2)照射プログラムのタイマーを既定値と異なるにタイマー設定をしたい場合、UPボタンで一度押す度にタイマーが1分単位で長くなり、DOWNボタンで一度押す度にタイマーが1分単位で短くなります。(1~30分まで設定可能)
(3)WAKE UPタイマー設定時の時/分の設定時にも使用いたします。(9時間59分後まで設定可能)
- 7 [表示モニター]
(1)照射プログラム:左に「P」が表示。右側に2ケタでプログラムナンバーが表示されます。(例:「P:05」)
(2)タイマー:右側に2ケタでタイマー(分)が表示されます。(例:「 15」(15分))
(3)WAKE UP:左側に1ケタで時、右側に2ケタで分が表示されます(最大9時間59分)。(例:「3:15」(3時間15分))
(4)照射プログラム実行中:プログラムナンバーと残り時間(1分単位)が交互に表示されます。
(5)照射プログラムをSTARTさせた場合、照射実行までの5秒を1秒単位でカウントダウン表示。
- 8 [START/STOP] ボタン
(1)照射プログラム選択後、ボタンを押すとプログラムを実行します。
(2)照射プログラム実行時、ボタンを押すとプログラムを停止します。
(3)WAKE UP時間設定後、ボタンを押すとWAKE UP設定完了。

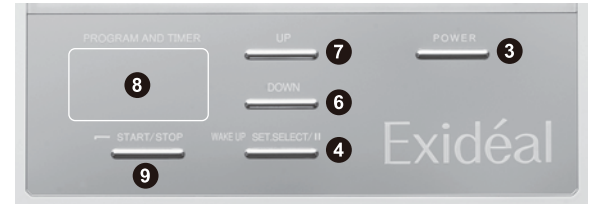

4 ACアダプター



- AC:100~240V
- 50/60Hz
- 24V 1A
- 105.4×44.6×29.2mm

5 専用ゴーグル



※ご利用のプログラムによってゴーグル着用が必要です。本書の操作手順(P.7)をよくお読みいただき、着用が必要なプログラム時には、必ず装着ください。

エクスイディアルの特長

エクスイディアルは、高輝度LEDを280個使用。
「高出力4波長LED搭載の大型設計フォトトリートメント美顔器」です。

1 簡単操作(毎日使うプログラムなら、POWERボタンとSTARTボタンだけで使用可能)

用途別トリートメントプログラムを選択するだけの簡単操作。少ない操作ボタン数(5個)と操作実行をわかりやすくする効果音方式で誰でも簡単に使用いただけます。

2 非接触型美顔器


美顔器に触れずにトリートメントが可能です。直接肌に触れないので肌へのストレスが大幅に軽減。また、非接触により接触雑菌による炎症トラブルがありません。



最大10000回/秒のパルス出力
一般的直流照射の2倍以上の瞬間輝度があります。

3 高輝度LED

4波長280個の高輝度LEDを使用した広面積の照射ワイド設計。
エステサロンでも導入されている美容器を一般家庭で使用することを可能にしました。

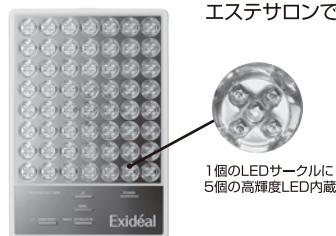

1個のLEDサークルに5個の高輝度LED内蔵

LEDサークル56個 × 高輝度LED5個 = 高輝度LED280個

950nm波長LED(赤外線):28個
640nm波長LED(赤色LED):112個
590nm波長LED(黄色LED):112個
460nm波長LED(青色LED):28個

4 高出力LED


最大LED出力ドライブ 15W(ワット)

5 独自の高效率照射光学設計

LEDの配置位置と鏡面仕上げのミラー反射板(ミラーパネル)の設置で表皮面相互反射により、照射効率を120~130%アップさせた独自の光学設計が、より効率の高いフォトトリートメントを可能にします。*ミラー反射板がない美容器との比較になります。



ベースのパネル全体は、独自の光学設計によるミラーパネル(鏡面)仕上げ

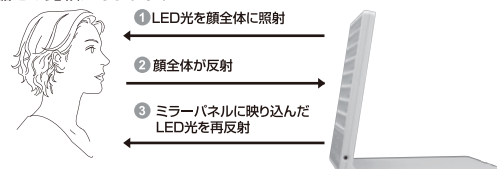

6 ストレスのないハンズフリー

両手がフリーになるので他のことをしながらリラックスした状態で使用できます。




マッサージをしながらトリートメント



電話をしながらトリートメント

7 大型設計

顔全体に照射可能な大型設計。これにより 全顔を一度にカバーすることができ非常に効率的なフォトトリートメントを行うことが可能です。顔だけではなく他のカラダの部位など全身に手軽に使用していただけるのも大きな特長です。ハンズフリー式ですので背中など手の届かないところにも照射が可能です。

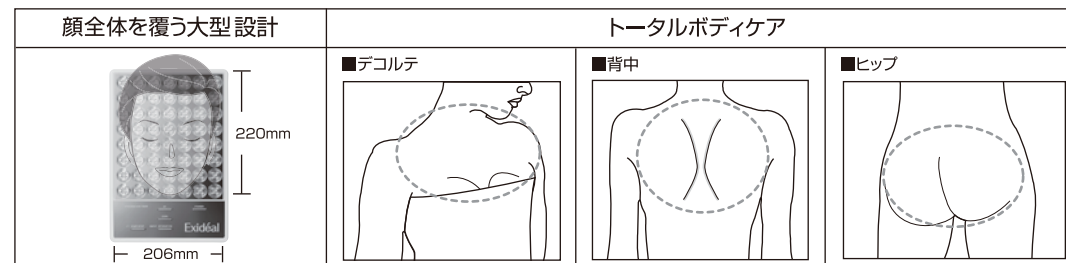

8 「トラブルが起こりがちなTゾーン」ケアサポートプログラム(P08)搭載



顔のパーツに合わせたLED配置により、全顔のケアをしながら気になるTゾーンケアも入念に行えます。

9 MYメモリー機能

一度使用したプログラム(機能)のタイマーは、マシンに内蔵されたシステムが自動的に記憶します。次回使用する際に、前回の使用内容(タイマー)が表示されます。また、MYメモリー機能はアダプターを抜いても記憶しています。*タイマーは、最高30分まで設定可能です。

10 ウェイクアップモード

この機能は、本製品の特長である高出力、広面積照射を利用し、設定した時間に自然な光を照射して、目覚めの時間の合図を送る機能です。(詳しくは、P.111ページ参照)



【注意】

LED照射パネルを90度以上開いてご使用の場合は、顔などに落下して危険ですので、必ずベースプレートに手を添えて使用してください。また、本製品を顔より高い位置に設置して、LED照射パネルを90度以上開いての使用は非常に危険ですのでおやめください。

操作手順

1




クレンジング・洗顔で素肌状態にし、お持ちの基礎化粧品*を顔全体につける。

*基礎化粧品の使用は、照射前だけでなく、照射中、照射後も使用いただけます。

*美容液やクリームなど基礎化粧品であれば使用いただけます。

2



本体にACアダプターを接続してください。


3



コントロールパネルのPOWER(起動)ボタンを押し電源を入れる

(1)起動音がなります
(2)表示モニターにプログラムナンバーが表示されます。(初めての作動時は、P:01。2回目以降は、最後に使用したプログラムナンバーが表示されます。)
※サイレントモード時、音は一切ありません。


4



表示モニターのプログラムナンバーを確認しながら、コントロールパネルのUP/DOWNボタンでお好みのプログラムを選択してください。

(1)UP/DOWNボタンにより照射プログラムを選択します。
(2)UPボタン:1クリックごとにP01~P10→P01の順で表示されます。
(3)DOWNボタン:1クリックごとにP10→P01→P10の順で表示されます。
※プログラム選択をせずにSTARTボタンを押した場合、表示しているプログラムがすぐに実行されます。

5



使用したいプログラムが決まればSET.SELECT/IIボタンを押し、ⓐの時間設定を行います。


6



表示モニターの照射時間を確認しながら、コントロールパネルのUP/DOWNボタンでタイマーを設定(最大30分まで設定可能)してください。

(1)最初の表示は、プログラムごとに設定された既定値(標準照射時間)が表示されています。変更が必要な場合は、手順⑦から操作できます。
(2)照射時間の変更は、UP/DOWNボタンにより設定(最小1分~最大30分)ができます。
(3)UPボタン:1クリックごとに1分単位で1~30→1の順で表示されます。
(4)DOWNボタン:1クリックごとに1分単位で30→1→30の順で表示されます。
(5)照射時間の設定途中で、STARTボタンを押した場合、その時間を記憶し照射プログラムを実行します。
(6)照射時間の途中でSETボタンを押すと直前時間を記憶し、照射プログラムの設定に切り替わります。
(7)一連の動作でプログラム設定および時間設定途中でUP/DOWNボタンを押さずにSETボタンを押すと、1回押す毎にそのプログラムナンバーと設定時間が表示モニターに表示され確認することができます。


7

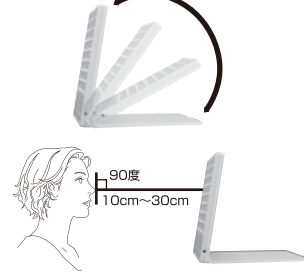

照射角度と照射距離を調整する。

90度
10cm~30cm

8




※ゴーグル着用時も目は閉じてください。

ゴーグル要のプログラムは、専用ゴーグルを必ず装着してください。

本器を使用する際には、付属のエクスイディアル専用ゴーグルを必ずご使用してください。

●ゴーグル着用プログラム
P01・P03・P05・P07・P08・P09・P10


9



STARTボタンを押すと照射が始まります。中止する場合、もう一度STARTボタンを押すと照射が止まります。

(1)照射プログラム、タイマー設定完了後、STARTボタンによりプログラムが実行されます。STARTボタンを押すとSTART表示(赤色)が点灯します。
(2)ゴーグル着用プログラムを選択されている場合は、表示モニターで5秒のカウントダウンがはじまり5秒後に照射プログラムが実行されます。(5秒の間にゴーグルを着用ください)
(3)ゴーグル不要プログラムは、STARTボタンを押すと照射プログラムが実行されます。
(4)プログラム実行中は、5秒ごとに残り時間が表示モニターに表示されます。
(5)プログラム実行中に一時停止したい場合、SELECTボタンを押すと一時停止音がなり照射プログラムを一時停止します。START表示(赤色)が点滅に変わり一時停止状態を確認できます。
(6)再スタートする場合は、もう一度SELECTボタンを押すとプログラムが再スタートします。
(7)プログラム実行中または一時停止中にSTARTボタンを押すと、実行中のプログラムは停止します。カウントダウンタイマーもリセットされ、プログラムの再設定が可能になります。
(8)STARTボタンを押すと、実行したプログラムの時間を記憶します。また、常に最後に使用したプログラムが記憶され次回プログラム選択時の最初に表示されます。

10

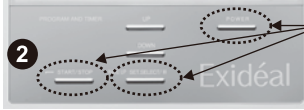

※サイレントモードで使用する

(1)POWERボタン、SET.SELECT/IIボタン、START/STOPボタンを同時に押します。
(2)START/STOPボタンを押して照射プログラムを開始します。
※サイレントモードを解除する場合は(1)と同じ動作で解除できます。

10ケアサポートプログラム

■照射プログラムの基本

4波長のLEDを効率よく作用させることを目的とした独自の肌ケアサポート・プログラムです。肌に合ったプログラムを選択してご使用してください。

■注意

現在、医療機関で治療を受けている場合や薬物治療を受けている場合は、本製品を使用しないでください。また、本製品のすべてのケアサポート・プログラムは医療効果を一切含みません。

プログラム01・02：キメ、ハリをサポートプログラム



肌のキメ、ハリサポート対策として使用してください。



■ポイント

肌のキメとハリは密接した関係にあり、うるおいを与えることがとても大切です。蒸しタオルなどで軽くあたためてから化粧水・美容液・乳液などでたっぷり保湿した後、本プログラムでのトリートメントを行います。年齢に応じたエイジングケアとして、ハリ感のあるキメの整った肌を目指します。

■ゴーグル着用について

P01プログラムでは、必ず専用ゴーグルを着用し目を閉じてプログラムを実行してください。P02プログラムは、専用ゴーグル着用の必要がないように光(LED)出力を落としていますが、必ず目を閉じてプログラムを実行してください。出力を落としていますが、時分割コントロールにより瞬間エネルギーはP01と変わらず同様のケアサポートを得られます。

[P01 ゴーグル要]

[P02 ゴーグル不要]

※必ず目を閉じてご使用ください。

	既定値 標準照射時間 5分		既定値 標準照射時間 12分
---	----------------------------	---	-----------------------------

プログラム03・04：思春期肌のケアサポートプログラム



なめらかな肌へのケアサポートとして使用してください。



■ポイント

乱れた生活リズムや食習慣等に影響を受ける肌へ。メイクを落とすとき等は手を清潔にした状態にし、化粧水で十分に保湿したあと(もしくは保湿しながら)本プログラムの使用を行います。また、外面のケアだけでなく規則正しい生活習慣(食生活や十分な睡眠)を心がけ、体の中からケアすることもとても大切です。

■ゴーグル着用について

P03プログラムでは、必ず専用ゴーグルを着用し目を閉じてプログラムを実行してください。P04プログラムは、専用ゴーグル着用の必要がないように光(LED)出力を落としていますが、必ず目を閉じてプログラムを実行してください。出力を落としていますが、時分割コントロールにより瞬間エネルギーはP03と変わらず同様のケアサポートを得られます。

[P03 ゴーグル要]

[P04 ゴーグル不要]

※必ず目を閉じてご使用ください。

	既定値 標準照射時間 5分		既定値 標準照射時間 10分
---	----------------------------	---	-----------------------------

[注意]

ニキビや吹き出物で激しい炎症を起こしている場合は使用しないでください。また、通院や薬の服用をしている場合も使用しないでください。

10ケアサポートプログラム

10ケアサポートプログラム

プログラム05・06：肌荒れ、乾燥肌のケアサポートプログラム

P05

冬の乾燥時や冷房の効きすぎなど、乾燥を感じたときのケアに使用してください。

■ポイント

「環境と生活リズムの変化」と「肌の皮脂や汗のバランス」の関係はとても密接しています。1年を通し、空気の乾燥やエアコン等で肌は乾燥しがちです。化粧水や美容液などでたっぷり保湿した後、オイルやクリームなどで軽くマッサージする事により肌を和らげます。

P06

■ゴーグル着用について

P05プログラムでは、必ず専用ゴーグルを着用し目を閉じてプログラムを実行してください。P06プログラムは、専用ゴーグル着用の必要がないように光(LED)出力を落とされていますが、必ず目を閉じてプログラムを実行してください。出力を落とされていますが、時分割コントロールにより瞬間エネルギーはP05と変わらず同様のケアサポートを得られます。

[P05 ゴーグル要]

[P06 ゴーグル不要]

※必ず目を閉じてご使用ください。

	既定値 標準照射時間 5分		既定値 標準照射時間 10分
---	----------------------------	--	-----------------------------

プログラム07：輝き肌のケアサポートプログラム

P07

外出時等、外部環境の影響を受けた肌のアフターケアに使用してください。

■ポイント

顔はもともと外部の影響を受けやすく、過酷な肌環境の下にあります。季節や状況に合わせて化粧水や美容液、日焼け止め等を使い分けながら、しっかりケアすることが大切です。規則正しい生活習慣(食生活や十分な睡眠)を心がけましょう。

[P07 ゴーグル要]

※必ず目を閉じてご使用ください。

	既定値 標準照射時間 5分
--	----------------------------

プログラム08：トラブルが起こりがちなTゾーンのケアサポートプログラム

P08

「Tゾーンが気になる」そんなお肌のケアに使用してください。

■ポイント

皮脂と水分のバランスが崩れるとTゾーンが脂っぽく感じたり、肌も硬くなりやすくなります。皮脂は水分蒸発を防ぎ肌を保護するために必要である反面、量が多いと肌に良くない影響をもたらします。いつも清潔に心がけて皮脂によるトラブルを防ぎましょう。



[P08 ゴーグル要]

※必ず目を閉じてご使用ください。

	既定値 標準照射時間 5分
--	----------------------------

プログラム09：秋・冬トータルケアサポートプログラム

P09


主に秋・冬の素肌トータルケアをサポートするプログラムです。プログラムP01・P05・P07のケアサポートを短時間にミックスしたプログラムです。

■複合ケアサポート内容

- (1)P01:肌のキメ、ハリをサポートプログラム
- (2)P05:肌荒れ、乾燥肌のケアサポートプログラム
- (3)P07:輝き肌のケアサポートプログラム

[P09 ゴーグル要]

※必ず目を閉じてご使用ください。

	既定値 標準照射時間 8分
---	----------------------------

プログラム10：春・夏トータルケアサポートプログラム

P10


主に春・夏の素肌トータルケアをサポートするプログラムです。プログラムP01・P07・P08のケアサポートを短時間にミックスしたプログラムです。

■複合ケアサポート内容

- (1)P01:肌のキメ、ハリをサポートプログラム
- (2)P07:輝き肌のケアサポートプログラム
- (3)P08:トラブルが起こりがちなTゾーンのケアサポートプログラム

[P010 ゴーグル要]

※必ず目を閉じてご使用ください。

	既定値 標準照射時間 8分
---	----------------------------

使用上の注意・安全機能について

■使用上の注意

- ① 本製品の使用環境温度は、-5℃～+40℃の範囲で使用してください。また、この使用範囲の温度であっても内蔵マイクロコンピューターの安全機能が作動し、十分なトリートメント照射ができない場合があります。極力、30℃以下の環境で使用することをおすすめします。サウナなどでの使用は、故障や事故の原因になりますので絶対に使用しないでください。
- ② 本製品を毛布にくるんだり、布団の中での使用など本製品の放熱が十分できない環境下での使用は絶対にしないでください。また、ストーブやエアコンの吹き出し側など本製品が高温になりやすい場所での使用は故障、火傷などの事故の原因になる他、安全対策機能の作動により十分なトリートメント効果を得られない可能性があります。
- ③ お風呂場や洗面所など結露しやすい場所では、本製品のマイクロコンピューターの誤作動や故障の原因になりますので使用はお避けください。また、お風呂場での使用は感電事故の原因にもなりますので絶対にしないでください。

■安全機能について


- ① 本製品には、内部温度上昇を検知してマイクロコンピューターが自動的に出力を落とす機能が搭載されています。使用上の注意をよくお読みいただき適切な環境下で使用してください。照射機能が停止し、「E-01」、「E-03」が表示モニターに表示された場合、周囲の温度が非常に高いか毛布や布団など本製品の放熱を妨げる環境での使用が過度の使用が考えられます。一度POWER(起動) ボタンを押して再起動してください。再起動後も「E-01」が表示される場合は、ACアダプターをコンセントから抜いて電源OFFにし、1時間程度経ってから使用環境を変えて使用してください。
- ② 本製品には、内部温度の異常を検知し自動的に作動停止させる安全装置が搭載されています。例えば、ストーブなどの放射熱により本製品が異常高温になった場合など安全のため自動停止します。照射プログラムの使用中に表示モニターに「E-02」が表示された場合、ACアダプターをコンセントから抜いて1時間程度電源OFFにし、異常高温の原因になるものから離れて使用してください。

**「美しさと健康」をテーマに、朝から快適な毎日をサポート。
朝浴びる光で、毎朝規則正しく目覚めの時間の合図を送ります。**

独自のLEDプログラムで光の刺激を送る目覚まし機能。起床時間に合わせて強い光を一定時間浴びることで、目覚めの時間をお知らせします。


【機能概要】

本製品に内蔵された24時間タイマーにより動作する機能です。
例えば、現在の時刻が午後11時で起床時間を午前7時に設定したい場合、8時間後ということになります。従って設定を8時間とすれば、翌朝7時に自動的に照射が実行されます。この機能は、機能解除を行うかACアダプターを抜かない限り、毎日同じ時間にウェイクアップ照射が実行されます。

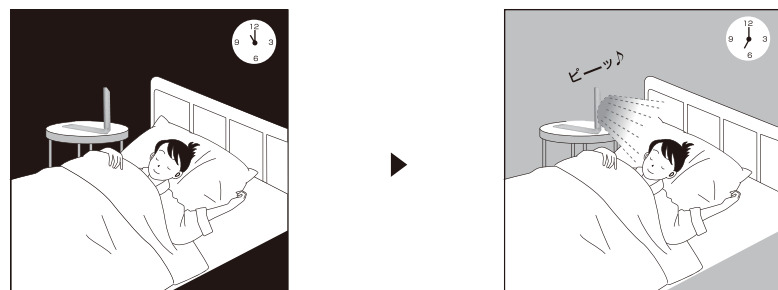

【ウェイクアップモード設定方法】

- POWER(起動)ボタンを押し、電源ONにします。
- 照射プログラムが実行されていないときに、SELECTボタンを「2秒間」長押しします。
表示モニターに「9:00(既定値/9時間後)」が表示され、SELECTボタン横にあるWAKE UP表示が点滅します。
同時に左端の「9(時間)」の部分が点滅しますので、UP/DOWNボタンを使って設定したい時間設定(0~9)を行ってください。
- もう一度SELECTボタンを押すと「0(10分単位)」が点滅します。UP/DOWNボタンを使って設定したい10分単位設定(0~5)を行ってください。
- もう一度SELECTボタンを押すと「0(1分単位)」が点滅します。UP/DOWNボタンを使って設定したい1分単位設定(0~9)を行ってください。
- 上記(2)~(4)の設定完了後、STARTボタンを押してください。「ピピピピ」という設定完了音が鳴りウェイクアップ設定の完了です。
SELECTボタン横にあるWAKE UP表示が点灯に変わります。
- 一度設定したウェイクアップモードは、ACアダプターを抜くか、ウェイクアップモードの解除を行わない限り毎日同時刻に実行されます。ウェイクアップモードが設定されていると起動中はWAKE UP表示が点灯し、POWERボタンを切るとWAKE UP表示が点滅しウェイクアップモードが実行されていることを確認いただけます。

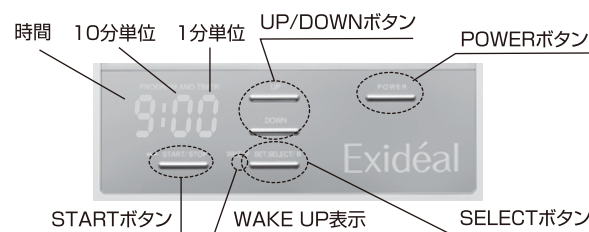

【ウェイクアップモードの動作】

- ウェイクアップモードが起動すると、15分間(固定)のウェイクアップ照射が実行されます。
- ウェイクアップ照射実行中にSTARTまたはSELECT、POWERボタンを押すと照射が停止し電源OFFの状態になります。
- また、15分間の照射が終了した場合も、自動的に電源OFFの状態になります。

【ウェイクアップモード解除方法】

- POWER(起動)ボタンを押し、電源ONにする。
- SELECTボタンを「2秒間」長押しします。(設定モードに戻ります)
- もう一度、SELECTボタンを「2秒間」長押しすることにより「解除」され、WAKE UP表示も消灯します。
※停電が発生した場合、ウェイクアップモードは解除されますので再設定が必要となります。
※ACアダプターを抜くと解除されます。

Q&A

	質問と回答
Q1	Q.LEDってなんですか?色が美容に良いのですか? A.Light Emitting Diodeの略で、特定な光(波長)を持つことが特徴で、家電製品や表示に使われている半導体です。美容目的の物は、特に波長や強度を重視して厳選し使用しています。また光の色そのものは特定な周期を持った波から出来ており、波の周期を波長といいます。
Q2	Q.目には全く影響ないのでしょうか? A.直接視力などに影響する事はありません。ただ、瞬間的に非常に強い光を見ると一時的に周りが暗く感じる事がありますので「ゴーグル要」に該当する照射プログラムでは必ずゴーグルを着用し、ゴーグル不要の照射プログラムでも必ず目を閉じて使用してください。
Q3	Q.光エステですが体の全ての部分に当てても大丈夫ですか? A.問題ありません。ただしゴーグル要のプログラムを使用の場合は、照射面をできるだけ直視しないように注意してください。エクスイディアルは、大型設計ですのでトータルボディケアとして身体の各部位にも使用可能です。
Q4	Q.ニキビがある時は使えますか? A.炎症がひどい時はお休みしてください。炎症が治まりましたら、少しずつ様子を見ながら、再開してください。
Q5	Q.毎日使用するのはどのモードが良いのですか?2つ3つとモードを変えて使用しても肌に問題は有りませんか? A.トータルケア春夏や、トータルケア秋冬を使用いただくと、面倒な切り替えが必要なく複数のケアサポートプログラムを自動で使用いただけます。もちろん個別に切り替えて使用いただいても有害な紫外線などは全く含まれていませんので安心して使用してください。
Q6	Q.使用中は少しでもピリピリしたりすることはありますか? A.本製品は非接触型美顔器ですので、電気刺激は全くなく、とても安全な美顔器です。
Q7	Q.日焼け直後ヒリヒリしてる時に使用してもいいですか? A.日焼けはお肌の表皮が紫外線により火傷した状態ですので、少なくとも3日は使用をお控えください。洗顔後、肌がつっぱった感じや痛み、その他の違和感が無ければ安心して使用いただけます。
Q8	Q.顔を近くにあてるのと少し離れてあてるのでは、効果は違うのですか? A.LED照射面から離れるほど光が弱くなります。10cm~30cmの距離で使用してください。
Q9	Q.ウェイクアップモードを設定したまま解除を忘れて旅行に出た場合、起動して火事になる可能性はありますか? A.本製品にはさまざまな安全装置が組み込まれていますが、長期に渡って使用しないときは必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。
Q10	Q.どのくらい(何時間)光をあてても大丈夫ですか? A.基本的に何時間光をあてても問題ありません。一回の目安としてはプログラムごとに規定値が決まっているので、プログラム説明をご参照ください。本製品は、美容のお手伝いをするケアサポートプログラムなので、毎日少しずつ続けてトリートメントされることをお勧めします。
Q11	Q.ウェイクアップモード使用で、ACアダプターを1ヶ月繋いだままにした場合の1ヶ月の電気料金は? A.1日2回のトリートメントでウェイクアップモードを使用の場合、1ヶ月の電気代は約39円です。
Q12	Q.使用後のお手入れは? A.本製品は非接触型の美顔器なので基本的に必要ないですが、照射面が汚れた場合やスイッチボタンの周りなど汚れに関しては、柔らかい布に少々の中性洗剤をしみこませ、良く絞ってふき取ってください。アルコールやシンナー、除光液などは変形や故障の原因になりますので使用しないでください。
Q13	Q.付属品だけの購入はできますか?また、修理はできますか? A.付属品の購入に関しては、ゴーグルケース以外は可能です。修理に関しては、お買い上げのお店またはエクスイディアル・カスタマーサービスへご連絡ください。
Q14	Q.海外でも使えますか? A.100V-240Vまで対応しておりますので、コンセントの形状を合わせれば変圧器の必要なく使用できます。使用国の電圧をお確かめになってから使用してください。

トラブルシューティング

トラブルの症状	考えられる原因	対処方法
表示モニターに「E-01」エラーメッセージが表示された場合	周囲温度が高いか、毛布や布団などの本製品の放熱を妨げる環境下での使用により内部温度が上昇したと考えられます。	POWER(起動)ボタンを押し、使用環境を変えて再起動してください。それでも「E-01」のメッセージが消えないときは、電源を切って1時間程度経ってから、使用環境を変えて再起動してください。
表示モニターに「E-02」エラーメッセージが表示された場合	ストーブなどの放射熱により本製品の内部温度が高温になったことで安全装置が作動し、自動停止したことが考えられます。	一度POWER(起動)ボタンを押し、電源を切って1時間程度経ってから、本製品の温度上昇の原因と考えられるストーブなどの暖房設備から離れて使用してください。
表示モニターに「E-03」エラーメッセージが表示された場合	周囲温度が高いか、毛布や布団などの本製品の放熱を妨げる環境下での使用により内部温度が上昇したと考えられます。	POWER(起動)ボタンを押し、使用環境を変えて再起動してください。それでも「E-03」のメッセージが消えないときは、電源を切って1時間程度経ってから、使用環境を変えて再起動してください。
電源スイッチを入れても何も表示しない	ACアダプターがしっかり接続されていない。	ACアダプターが、コンセントまたは本製品にしっかり接続されているか確認し、使用してください。
ウェイクアップ設定が解除されている	停電またはACアダプターがしっかり接続されていない。	ACアダプターがしっかり接続されているか確認してください。また、停電があった場合はウェイクアップの再設定を行ってください。
突然LED照射も表示も消えてしまい、動作しなくなった	冬場などに人体からの静電気放電が考えられます。	本製品はマイクロコンピュータを搭載した機器であり、大きな静電気放電によりリセット機能が働く場合があります。一度ACアダプターを抜いて、5秒程度経ってから再度電源を入れ直してください。
テレビやエアコン・照明器具のリモコンが動作しなくなった	本製品の赤外線出力がテレビやエアコン・照明器具の受光部に影響している。	照射面の向きを変えてテレビやエアコン・照明器具に直接光が当たらない向きで使用してください。また、本製品の照射を停止すると影響はなくなります。

【注 意】

上記トラブルシューティングに該当しない異常動作がある場合、弊社カスタマーサービスへお問い合わせください。

【保証について】

■保証書について

保証書は、裏表紙に添付しております。必ずご購入先名、ご購入日などの必要事項の記入をお確かめのうえ、本書を大切に保管してください。保証内容につきましては、必ずお読みください。

■保証期間について

保証期間は、ご購入日より1年間です。

■修理を依頼される時

サービスを依頼される前に、取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常がある場合は、電源プラグを抜き、ご購入先または弊社カスタマーサービスへご相談ください。

※送付される場合の送料はお客様負担となります。修理後の配送料は弊社にて負担させていただきますので、予めご了承願います。

●保証期間中の場合

保証書の規定に従って修理いたします。ご購入先または弊社カスタマーサービスへ保証書を添えてご持参いただくかご送付ください。

●保証期間を過ぎている場合

修理により製品機能が維持でき、使用できる製品は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。ご購入先または弊社カスタマーサービスにご相談ください。

■アフターサービスについてご不明の場合

弊社カスタマーサービスにお問い合わせください。

■エクスイディアル・カスタマーサービス

修理・お手入れ・お取り扱いなどのご相談は、まずご購入先へお申し付けください。

カスタマーサービス

エクスイディアル・カスタマーサービス

フリーダイヤル **0120-034-503**

受付時間:月～金(祝祭日を除く) 10:00～17:00

【仕様について】 MADE IN JAPAN

■本体

電源方式	付属 専用アダプター使用	定格入力(電源)	DC24V ----- 1A
定格消費電力	20W(最大)	待機消費電力	3W以下
LEDドライブ出力	15W(最大)	LED出力波長	420～970nm
重 量	1.66Kg		
製品寸法	ヨコ:206mm タテ:300mm 高さ:30mm	適正温度	使用温度範囲:-5℃～+40℃
			保管温度範囲:-5℃～+45℃

※本製品は美容器であり、医療機器の効果効能はありません。

株式会社ハスラック

◆美容事業部

〒105-6306
東京都港区虎ノ門1丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー6階
TEL:03-6206-6188 FAX:03-6206-6289

◆大阪商品センター

〒566-0055
大阪府摂津市新在家2丁目2番6号
TEL:06-6827-0307 FAX:06-6827-0304