

Exidéal libra 保修卡

本保修卡针对自购买日起至下述期间内发生故障时,按照下列描述的内容予以免费维修。
对于要求填写个人信息的目的,请参考保修卡的下方记载。

型号	EX-HA03-PG		
产品编号			
保修期	主机日起一年		
购买日			
客户信息	邮编		
	地址		
	姓名		
	电话号码		
购买店			

【免费维修规定】

- 1) 在按照说明书和主机上的标签指示进行规范操作使用,但在保修期内却发生故障时,可根据本保修卡中记录的内容,进行免费维修。
 - 申请免费维修时,请向购入店出示本保修卡。如果是邮寄至我司客服中心,运费则由客户自己负担。
 - 如果不向产品的原购入店申请维修,请咨询我司客服。
- 2) 搬家后的产品修理方法,请联系产品的原购入店或请咨询我司客服。
- 3) 由他人赠送本产品,导致无法在本保修卡上填写的购入店办理免费维修时,请咨询我司客服。
- 4) 即使是在保修期内,如果出现下述情况时,则为有偿服务。
 - 错误的使用以及不当的修理、改造而产生的故障及损伤
 - 购买产品后,因保管地的移动、运输、跌落等原因造成的故障及损伤
 - 火灾、地震、水灾、打雷及其它天灾地祸、异常电压、使用指定外的电源(电压、电频)等原因而产生的故障及损伤
 - 因车辆、船舶搭载等而产生的故障及损伤
 - 非作为一般家庭使用(例如作为商用等)时的故障及损伤
 - 没有出示本卡时
 - 本卡中未填写购入日期及购入店、姓名,或是文字有涂改时
- 5) 消耗品的更换为有偿服务。
- 6) 本卡仅限于日本国内有效。
- 7) 本卡一旦丢失,不会补发,请妥善保管。


■对于客户个人信息的处理

※对于客户填写的个人信息(保修卡副本),在保修期内免费维修及安全检查时可能会用到,请知悉。
※在本卡中明示的期间内,根据条件,凭本保修卡承诺免费维修。发行本保修卡的保修责任人及除此以外的企业不拥有对客户在法律上的权利限制。对于过了保修期的产品维修,如有疑问,请咨询购入店或者我司客服。
※过了保修期后的售后服务,请参考说明书的「保修」内容。

说明书 / 保修卡

Libra
Exidéal

- P.1-P.2 安全须知
- P.3 包装内容与各部分的名称和功能 / 产品特点
- P.4 美容模式 / 使用准备
- P.5 操作顺序
- P.6 使用后 / 故障处理
- P.7 Q & A / 售后服务
- P.8 保修 / 产品参数

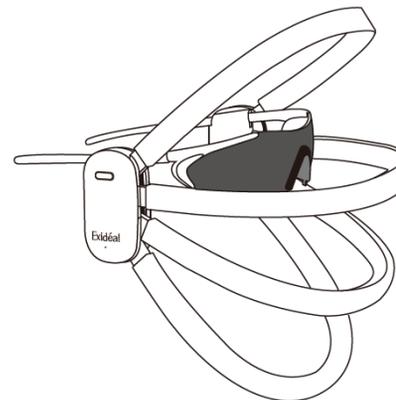

衷心感谢您购买我司产品「Exidéal libra」, 请仔细阅读说明书后再对产品进行使用。
在说明书后附有产品保修卡, 请妥善保管。

使用前请务必阅读安全须知，在理解的基础上正确使用。

- 此注意事项是为了避免产品的使用者和其他人受伤，请正确操作使用本产品。
- 注意事项按下述区分。

注意事项附刀稿

- 危险** 表示若不遵守该项操作指示有可能会造成人员死亡或重伤。
- 警告** 表示若不遵守该项操作指示可能会造成人员死亡或重伤。
- 注意** 表示若不遵守该项操作指示可能会造成人员受伤或者产品损坏。

图标释意

- 符号表示禁止行为
- 符号表示要按照指示内容执行的行为

危险

对于使用起搏器、心电图扫描仪等电子仪器客户，有可能会造成医疗电子设备无法正常运行，所以请不要使用。

警告

	使用本品时请勿直视LED灯芯。在使用本品护理面部肌肤时，请佩戴Exidéal专用护目镜。			
	请勿将本产品用于脸部、颈部或头皮护理目的以外的用途，或使用已损坏的本产品。如对肌肤及身体情况感到不安，请在使用前咨询医生。			
	<table border="1"> <tr> <td> 如有存在以下皮肤问题或属于该类肌肤时请勿使用。以免造成肌肤问题恶化。 ·光过敏症 ·患有皮肤病或皮肤相关旧疾的人群 ·皮炎（特应性皮炎、接触性皮炎、过度晒伤等） ·因粉刺、暗疮等原因化脓部位 ·湿疹、肿胀、疣（病毒性等） ·紫斑 ·黑皮症 </td> <td> 患有下述疾病的人群请勿使用。以免造成意外事故，或造成肌肤及身体问题。 ·急性疾病 ·血液疾病（出血性疾病、血友病等） ·因血压异常正在接受治疗或后期跟进的人群 ·发热性疾病 ·恶性肿瘤 ·传染病（感染性疾病） ·面部神经障碍 ·因交通事故等导致头部或眼部后遗症 </td> </tr> <tr> <td> 请勿将本产品用于下述皮肤或部位以免造成意外事故，或肌肤及身体问题。 ·敏感肌 ·伤口 </td> <td> 下述人群请勿使用。以免造成意外事故，或造成肌肤及身体问题。 ·会因闪光导致癫痫发作的人群 ·过敏体质 ·长期使用甾体激素药剂或存在肝功能障碍，导致毛细血管扩张的人群 ·处于生理期的人群 ·怀孕、产后1个月及哺乳中的人群 ·饮酒后或正在服用药物（尤其是诱发睡眠的药物）的人群 ·疲劳感强烈、身体不适以及需要静养的人群 ·体温在38°C以上（发烧）的人群 </td> </tr> </table>	如有存在以下皮肤问题或属于该类肌肤时请勿使用。以免造成肌肤问题恶化。 ·光过敏症 ·患有皮肤病或皮肤相关旧疾的人群 ·皮炎（特应性皮炎、接触性皮炎、过度晒伤等） ·因粉刺、暗疮等原因化脓部位 ·湿疹、肿胀、疣（病毒性等） ·紫斑 ·黑皮症	患有下述疾病的人群请勿使用。以免造成意外事故，或造成肌肤及身体问题。 ·急性疾病 ·血液疾病（出血性疾病、血友病等） ·因血压异常正在接受治疗或后期跟进的人群 ·发热性疾病 ·恶性肿瘤 ·传染病（感染性疾病） ·面部神经障碍 ·因交通事故等导致头部或眼部后遗症	请勿将本产品用于下述皮肤或部位以免造成意外事故，或肌肤及身体问题。 ·敏感肌 ·伤口
如有存在以下皮肤问题或属于该类肌肤时请勿使用。以免造成肌肤问题恶化。 ·光过敏症 ·患有皮肤病或皮肤相关旧疾的人群 ·皮炎（特应性皮炎、接触性皮炎、过度晒伤等） ·因粉刺、暗疮等原因化脓部位 ·湿疹、肿胀、疣（病毒性等） ·紫斑 ·黑皮症	患有下述疾病的人群请勿使用。以免造成意外事故，或造成肌肤及身体问题。 ·急性疾病 ·血液疾病（出血性疾病、血友病等） ·因血压异常正在接受治疗或后期跟进的人群 ·发热性疾病 ·恶性肿瘤 ·传染病（感染性疾病） ·面部神经障碍 ·因交通事故等导致头部或眼部后遗症			
请勿将本产品用于下述皮肤或部位以免造成意外事故，或肌肤及身体问题。 ·敏感肌 ·伤口	下述人群请勿使用。以免造成意外事故，或造成肌肤及身体问题。 ·会因闪光导致癫痫发作的人群 ·过敏体质 ·长期使用甾体激素药剂或存在肝功能障碍，导致毛细血管扩张的人群 ·处于生理期的人群 ·怀孕、产后1个月及哺乳中的人群 ·饮酒后或正在服用药物（尤其是诱发睡眠的药物）的人群 ·疲劳感强烈、身体不适以及需要静养的人群 ·体温在38°C以上（发烧）的人群			
如果充电用USB电线有损坏或异常发热，请勿使用。否则可能导致火灾、触电、短路或烫伤。				
	充电用USB电线存在损伤或异常发热的情况，或插入插座出现松动时请勿使用。以免发生火灾、触电、短路或烫伤。			

警告

	请勿投入火源、加热或长时间暴露于高温环境。否则可能导致过热、起火甚至爆炸。
	请勿在浴室、潮湿场所或易溅水区域（如洗手台等）存放本产品。否则可能引起材料老化，导致火灾或触电事故
	严禁在易燃物品附近使用本产品（包括酒精、稀释剂、汽油、洗甲水、喷雾剂等），否则极易引发火灾、触电或人身伤害事故。
	请勿在驾驶车辆时使用。可能导致交通事故或人身伤害。
	请勿佩戴本产品入睡。可能导致设备损坏、身体受伤或其他意外事故。
	请勿与其他电器产品（如美容仪器等）同时使用。否则可能导致设备故障、身体损伤或其他意外事故。
	以下情况下请停止使用并切断电源。或将正在充电中的本品脱离USB电线。以免导致火灾或触电。 ●本产品冒烟 ●本产品异常发热 ●本产品发出异响 ●本产品散发异味 等
	除我司指定的维修技术人员外，切勿擅自进行改造、拆卸或维修。以免起火或异常运行导致受伤。
	请勿浸泡在水中。以免造成触电或短路。
	请勿在头发潮湿时使用，以免导致触电或短路。
	请勿用湿手插拔USB电源。以免造成触电或短路。
	不使用或清洁维护时，请务必切断电源。以免因绝缘老化导致触电、短路、起火
	不使用或清洁维护时，请务必摘下专用护目镜后存放。以免导致镜片变形、开裂等损坏问题。
	首次使用或肌肤敏感的人群请缩短使用时间，并在使用时注意肌肤状况。以免造成事故或故障。
	请放置在儿童无法触及之处保管。以免造成事故或故障。
	请勿让宠物或年幼儿童使用本产品，或使用本产品玩耍。以免导致事故或受伤。
	使用时间或使用频率请以使用说明书为准。以免造成事故或故障。
	感到疼痛或不适时请停止使用。以免造成事故或故障。


注意

	在进行脱毛或刮毛处理的当天，请勿在同部位使用本产品。以免造成肿胀或发红。
	请勿弯折、摔落、抛掷或施加强烈冲击。否则可能导致意外事故、设备故障或其他损坏。
	请勿在本产品上方放置物品。
	请勿保管在如下场所。 ●阳光直射场所 ●高湿度场所 ●多粉尘场所 ●有着火危险的场所 ●暴露于风雨中的场所 ●高温或零下的场所 ●会产生化学药品、气体的场所 ●振动剧烈的场所
	请勿使用酒精、信那水、挥发油、碱性洗涤剂、漂白剂中、性洗涤剂或药品或杀菌、消毒剂擦拭。以免造成变形、变色、开裂等故障或破损。
	请务必使用5V直流USB电源。否则可能引发火灾、触电或人身伤害。
	拔出充电USB线时，请握住插头部位拔出，切勿直接拉扯线缆。
	使用前请摘下耳环、项链等金属饰品。否则可能导致意外事故或设备故障。

※ 请将本说明书存放在使用者随时可取阅的位置保管。
 ※ 如因错误使用、收纳或保管方式导致故障，即使产品在保修期内，也将不予免费维修，属有偿维修。

包装内容和各部分名称

●主机

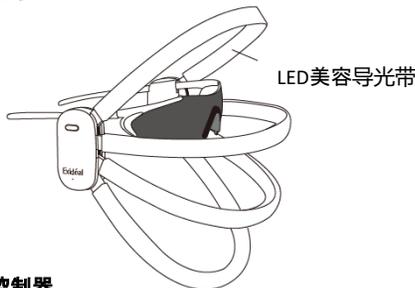

●配件

专用护目镜




鼻贴

鼻贴(4组)



充电专用USB电源线

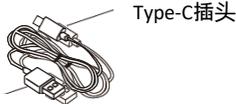


※本产品不附带USB电源。

●控制器

专用护目镜接口

电源/模式键

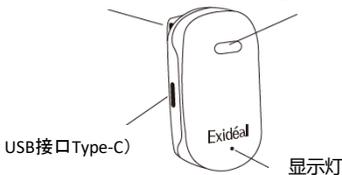

USB接口Type-C)

显示灯

Type-A插头

产品特点

蓝光萦绕，美肤养成新概念

LED美颜仪先驱品牌「Exideal」匠心打造最新款面膜式美颜仪。通过精妙的结构设计，实现一机三效，同步护理面部、颈部、头皮三大区域。红光、黄光、蓝光（多波长）搭载独家智能光疗程序，精准应对多种肌肤烦恼。解放双手结合开放式设计，让您在日常生活中的每一刻都能轻松实现“随行美容”。

1 三区一体美容仪

通过独创结构设计，实现一台仪器即可完成面部、颈部及头皮护理。一机三用，从此告别多台仪器切换的繁琐，针对三大重点护理区域轻松实现高效精准的全方位护理。

2 解放双手·舒适体验

采用可穿戴式夹持设计，佩戴时双手可自由活动，实现“边美容边追剧/玩手机”的便利体验。透气结构避免闷热感，保障长时间舒适使用。

3 独家专业LED美容导光带

追求美感与功能性、易用性的完美结合，开发出Exideal独有的可动式LED美容导光带。四向可调式LED光导系统，兼具精巧机身与广域光效优势，使用后仅需折叠收纳，即刻还原简洁空间。创新透气结构设计，更能确保长时间使用不闷热，打造舒适持久的美容体验。

4 独家专业LED光疗程序

搭载Exideal独家三色光LED系统（红/黄/蓝波长），针对不同肌肤问题预设专业程序。一键切换模式，每日仅需4分钟即可完成专业护理，美容新手也能轻松操作。

5 脉冲光技术

采用高速脉冲照射技术，相较持续光照，可提供更高瞬时光能强度

美容模式

三大智能护肤模式，精准匹配不同肤况与护肤诉求。

美容模式	特长	时长	建议使用部位
纹理·弹力 年龄肌	当时光在肌肤留下痕迹，正是开启专属抗老护理的契机。 选择本护理程序，以温和之力应对岁月肌况，重拾弹润饱满的年轻肤质。 *针对熟龄肌的定制护理方案	4分	 面部 颈部
青春期肌肤 护理	为因生活作息紊乱、饮食习惯不佳而反复出现的肌肤问题，量身定制本护理程序。 助您重焕柔滑美肌，触感如丝般细腻嫩滑。 *针对反复性肌肤问题的专项护理方案	4分	 面部 颈部
头皮护理	针对头皮与发丝的健康养护需求，本护理程序特别推出专龄护理方案。 ◆适用于反复染烫、紫外线照射等造成的头皮损伤修复 ◆为不同年龄阶段的头皮提供精准养护 *根据头皮状态定制的阶段性护理系统	4分	 头皮

使用前说明事项

◆ 充电指南

- 初次使用或电池耗尽时，请使用专用充电线进行充电。
- ①连接设备 将随附专用充电线的Type-C接口端插入机身侧面的USB充电端口
 - ②连接电源 将充电线的Type-A接口端连接至自备AC适配器等USB电源接口。
※建议使用5V1A的USB电源
 - ③ 充电状态 充电时指示灯闪烁，充满后转为常亮
 - 充电时，无法操作本机。
 - ④完成充电 充电完毕后请拔除充电线。
 - 购入后首次使用前，请确保完全充满电后再启用。
 - 温馨提示：设备在初次使用或长期闲置后，建议完成多次充放电以激活电池最佳状态。
 - 建议使用原装配套USB充电线，以确保设备安全及最佳充电性能。

充电时间

约3小时

续航时间

约20分钟

※电池续航时间及充电时长可能因剩余电量、环境温度及充电条件不同而存在正常波动。

◆ 关于连续使用

建议单次连续使用不超过12分钟。

◆ 关于肌肤·头皮护理

面部肌肤护理时，请先卸妆洁面、完成基础护肤步骤后(护肤水/乳液等)，再照射护理。请确认需照射护理部位(面部/头皮)的皮肤状态后再使用。
※如使用过程中有任何不适，应立即停止使用或及时就医。

◆ 关于饰品


使用前请摘除耳环、项链等面部/颈部周边金属饰品。

◆ 专用护目镜佩戴方法

· 面部照射时必须佩戴配套的原装护目镜。
若护目镜出现滑动/偏移，请使用随附的鼻垫配件进行调整。

【安装方法】


- 将护目镜柄端完全插入机身侧面的专用插槽。
- 如示意图所示，拇指稳固按压插槽底座，保持镜腿与插槽平行匀速推进。
※请勿不当插拔操作，以免造成故障或破损。
- ※请佩戴原装专用防护镜，以免造成损坏、故障、损伤等。
- ※停用时请即除护目镜单独存放。

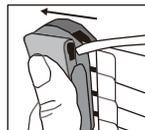

使用方法

• **[电源/模式键] 长按开机。**
→提示音“哔”响起的同时, 启动 **细纹.弹力.年龄肌** 的模式护理。

• **[电源/模式键] 短按时, 将依次循环切换**

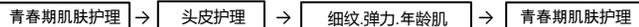

请根据护理需求选择合适的模式。

• 强制终止程序, 请长按[电源/模式键]。→提示长音“哔-”响起同时自动切断电源。

※模式不支持暂停。

※照射时切换模式立即生效, 将同步启动完整4分钟的新模式。



• 4分钟程序结束后, 长音“哔-”响起, 电源将自动关闭。

• 当电池耗尽时, 会发出“哔哔哔哔哔”的提示音, 同时指示灯闪烁5次, 请及时充电。

脸部护理时



- ① 安装护目镜
将专用护目镜完全插入插槽到底。(详细操作请参考P.4)
- ② 确认美容仪的佩戴方向
将机身正面朝向自己, 确保Exideal标识位于右侧。
- ③ 佩戴方法
手持控制器与专用护目镜一起, 根据脸部宽度同时向左右拉开, 如图所示, 夹于耳朵前方佩戴。
- ④ 展开LED美容导光带
慢展开LED美容导光带。若护目镜或美颜器发生偏移, 请调整护目镜的插入深度或控制器的佩戴位置。
- ⑤ 照射护理
长按[电源/模式键]启动、轻按模式键选择目标模式。程序结束后长音“哔-”响起, 同时设备将自动关机。

◆建议模式 **细纹.弹力.年龄肌** **青春肌肤护理**

颈部护理时



- 颈部肌肤护理时无需佩戴护目镜。
- ① 确认美容仪的佩戴方向
将机身正面朝向自己, 确保Exideal标识位于右侧。
 - ② 佩戴方法
手持控制器, 根据颈部宽度同时向左右拉开, 如图所示, 佩戴于颈部位置。
 - ③ 照射护理
长按[电源/模式键]启动、轻按模式键选择目标模式。程序结束后长音“哔-”响起, 同时设备将自动关机。

◆建议模式 **细纹.弹力.年龄肌** **青春肌肤护理**

头皮护理时



- 头皮护理时无需佩戴护目镜。
- ① 确认美容仪的佩戴方向
请确保控制器上的Exideal标识位于右侧, 同时LED美容导光带位于上方位置持握设备。
 - ② 佩戴方法
手持控制器, 根据头部宽度同时向左右拉开, 如图所示, 夹于耳朵上方佩戴。
 - ③ 展开LED美容导光带
慢展开LED美容导光带。
 - ④ 照射护理
长按[电源/模式键]启动、轻按模式键选择目标模式。程序结束后长音“哔-”响起, 同时设备将自动关机。

◆建议模式 **头皮护理**

注意

- 请务必在摘戴专用护目镜时, 全程按压硅胶部位进行操作。具体方法请参阅“专用护目镜佩戴指南”(第4页)
- LED美容导光带采用联动式设计, 请勿强行单独撑开或闭合其中一支。

使用后

- 如有污渍, 请使用干燥软布轻轻擦拭。硅胶部位的污渍, 请用拧干的湿布擦拭。
 ※请勿让化妆品(如化妆水、美容液)残留于机身表面, 否则可能导致变色或材质劣化。
 ※本产品不具备防水功能, 严禁水洗。
 ※清洁前请确保电源已关闭。
 ※禁止使用以下清洁剂: ▶ 酒精、稀释剂、汽油 ▶ 碱性清洁剂、漂白剂 ▶ 中性洗涤剂 ▶ 任何杀菌/消毒药剂。

◆存放规范

- 不使用本品时, 请取下专用护目镜, 清洁机身并放入盒内保存。
- 禁止存放于: 暖炉/加热器附近, 浴室等高温环境, 阳光直射场所, 不平稳的台面(建议存放于产品原包装盒内, 置于阴凉干燥处)。

故障处理

故障现象	原因	处理方法
无法开启电源	→ 未连接电源或没有按模式键	→ 请长按电源/模式键开机。
	→ 电量不足	→ 请充电(详见P.4)
使用中自动关机 / 充电后仅能维持数分钟	→ 电量不足	→ 请充电(详见P.4)
	→ 使用时, 当前程序结束	→ 所有程序运行结束后将自动关机。
	→ 蓄电池寿命	→ 需要更换充电电池, 请联系我司客户服务中心。
无法开始充电	→ 您使用的AC适配器未插入电源插座	→ 请将您自有的USB电源插头插入电源插座。(详见P.4)
LED灯芯不亮 / 部分不亮	→ 内部故障	→ 请重新启动电源并再次操作。若问题仍未解决, 请停止使用并联系我司客户服务中心。
程序运行超过4分钟仍未结束	→ 根据使用环境的不同, 执行完成的时间可能会有所变化。	→ 请长按电源/程序键关机。若问题仍未解决, 请停止使用并联系我司客服中心。
机身发热	→ 设备已持续运行过久	→ 若长时间连续使用, 设备可能会出现轻微发热现象。请关闭电源, 间隔一段时间后再使用。若问题仍未解决, 请立即停止使用并联系我司客服中心。

注意

现kī嘴

请 联伍

μW纯十

Q&A

	常见问题	回答
Q1	对眼睛有影响吗?	不会对视力有直接影响。短时间内直视强光后再看周围可能会产生暂时的昏暗感, 不建议直视光源。面部护理时, 有光直射眼睛请佩戴专用护目镜使用。
Q2	起痘时可以照射吗?	炎症严重时请勿使用。等炎症好转后, 根据自身肌肤状态使用。
Q3	晒伤后可以使用吗?	晒伤是由于紫外线造成的肌肤烫伤, 请停用几天。在洗脸后无刺痛紧绷感, 以及其他不适症状后再恢复使用。
Q4	使用时间有限制吗?	使用时间并无限制。连续照射时建议使用12分钟以内。
Q5	可以在海外使用吗?	本产品支持USB供电, 因此也可在海外使用。请务必使用直流5V的USB电源。根据使用国家的不同, 电压和插头形状可能存在差异, 请准备与当地相匹配的配件。
Q6	可以单独购买配件吗?	仅可购买专用护目镜。请在购买店铺或者官方网站购买。
Q7	可以使用非专用的市售护目镜吗?	使用本产品时, 请务必佩戴专用护目镜, 否则可能导致设备损坏、故障或人身伤害。
Q8	可以带妆使用吗?	请在卸除彩妆(卸妆、洁面)后, 涂抹水乳等基础保湿品后使用。

售后服务

- ◆关于充电电池
 - 充电电池属于消耗品 (不在保修范围内)
 - 若充电后使用时间明显缩短, 则表明电池已到使用寿命
 - 如需更换电池, 请咨询原购买渠道或联系我司客服 (参见第8页)
- ◆关于废弃处理
 - 本产品使用锂离子充电电池
 - 废弃本产品时, 请按照当地垃圾分类规定进行处理

保修

- 关于保修卡
保修卡在产品附带说明书底面。请务必填写购入店、购入日期等事项, 并妥善保管。请仔细阅读保修卡内容。
- 保修期
自购买日起一年。
- 办理维修
在申请前, 请再次确认说明书内容, 若有异常, 请拔除USB充电线, 联系购入店或者我司客服。
※维修邮寄费用由客户承担, 维修后返寄费用由我司承担。望知悉。
- 保修期内
根据保修卡内容进行维修。请将保修卡一同送至购入店或我司服务处。
- 保修期外
对于维修后可恢复使用功能的产品, 我司提供有偿维修服务, 请咨询购入店或我司客服。
- 有关售后的疑问
请咨询我司客服。

产品参数

MADE IN CHINA

使用电池	锂电池 3.7V 500mAh	充电时间	约3小时
主机重量	约172g	额定输入 (电源)	DC5V 1A
产品尺寸	约W158×H138×D63mm USB充电线长: 约1m	额定消耗电力	5W(LED照射时)

※本产品属于美容仪, 不具备医疗器械的功效及功能。

Haslux Co., Ltd.

●Beauty Business Division
ZIP:106-0032
29F ARK HILLS SENGOKUYAMA MORI TOWER, 1-9-10, Roppongi, Minato-ku, Tokyo, Japan
TEL:+81-3-6206-6188 FAX:+81-3-6206-6289
●Osaka Merchandise Center
ZIP:566-0055
2-2-6 Sinzaike, Settu City, Osaka Fu
TEL:+81-6-6827-0307 FAX:+81-6-6827-0304