


2in1 フロス&ブラシ コンパクト

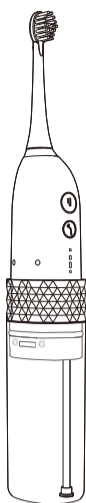

毎日の歯磨きは、口腔内の健康を維持し、歯を守るための最も基本的で重要な習慣です。虫歯や歯周病を放置すると、歯を失うだけでなく、全身の健康にも影響を及ぼすことがわかっています。しかし、手磨きだけでは歯垢や細菌を完全に除去するのは難しく、歯と歯の間や歯周ポケットの汚れが蓄積しやすいのが現実です。

そこで歯科医師としておすすめしたいのが、電動歯ブラシとウォーターピックが一体化した最新オーラルケアツール「2in1」です。音波歯ブラシのパワフルな振動や回転で歯の表面の汚れを効率よく除去し、さらにウォーターピックのジェット水流が歯間や歯周ポケットの奥深くまで洗浄。この二つの機能を一台で兼ね備えているため、従来の製品では実現できなかったトータルなオーラルケアが可能になります。歯列矯正中の方やインプラント・ブリッジを使用している方にも強力なケアツールとして力を発揮してくれます。

大切な歯を守ることは、健康な未来を守ること。毎日のケアをより効果的にするために、進化したオーラルケアを取り入れてみませんか？

推薦
DENTAL STUDIO STOD 東麻布歯科
院長 寺澤 章平

もくじ

各部名称/簡単マニュアル	A	クリーニングとメンテナンス	F
2in1 ブラシヘッドの使用法	B	Q&A 故障かな?と思ったら	G
フロスノズル/舌用クリーナーの使用法	C	使用上の注意と警告	H
ブラシやノズルのUV除菌	D	保証規定	I
充電方法	E		

初期確認 (必ず商品受け取り後、10日以内に実施)

商品をお受け取り後すぐに付属品が揃っているか、本体に傷がなく全ての機能が正常に作動するか、ご確認下さい。不具合や不良があった時は、**商品受け取り後10日以内に、この取扱説明書をご用意の上、お客様相談室にご連絡下さい。**状況をお伺いした上で、商品引取り等の対応をさせていただきます。尚、当社の了承なしに商品を着払いでお送り頂いても、受取りをお断りします。

点検事項 (□に✓を記入してご確認下さい)


- 付属品 □充電用USBケーブル □2in1 ブラシ(2個) □フロスノズル □舌用クリーナー
□収納ケース □取扱説明書 □リチウムイオン電池製品使用登録はがき (ご記入後、必ず当社へお送り下さい)

仕様

- サイズ(約): 本体(収納時充電アダプター込)16x4.5x3.5cm(使用時・ブラシ装着時29x4.5x3.5cm)
 - 重量(約): 220g ●電池電圧/容量: 3.7V/750mAh ●充電用入力端子/電圧/電流: Type-C/5V/2A ●フル充電までの時間(約): 2時間 ●材質: ABS樹脂、シリコン、ステンレススチール
 - 電池種類: リチウムポリマーバッテリー ●デザイン: 日本 ●原産国: 中国 ●防水機能: IPX7
 - 保証期間: 1年(但し、ブラシ・ノズルは消耗品ですので、保証期間内でも「有料」です。)
- ※ 本製品は日本国内用です。 For use in Japan only.


A <各部名称>

■本体

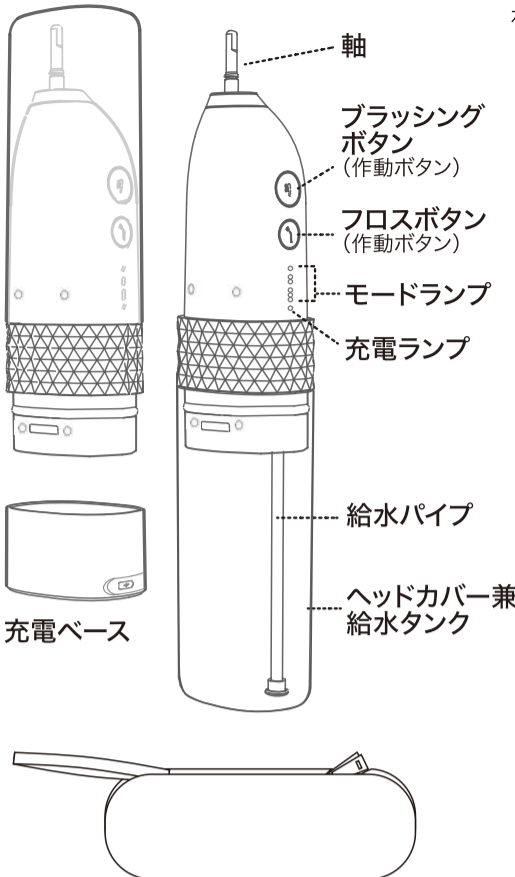

■付属品

水を噴出するノズルがあります。

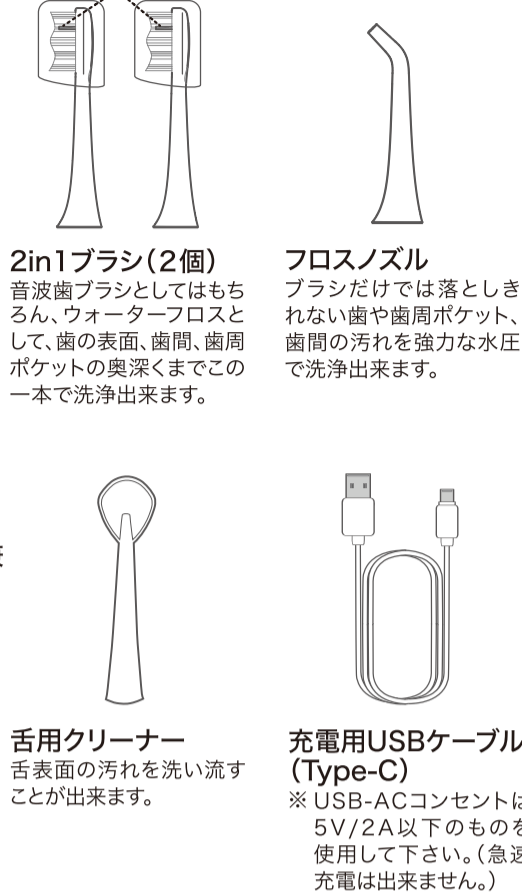

2in1 ブラシ(2個)
音波歯ブラシとしてはもちろん、ウォーターフロスとして、歯の表面、歯間、歯周ポケットの奥深くまでこの一本で洗浄出来ます。

フロスノズル
ブラシだけでは落とされない歯や歯周ポケット、歯間の汚れを強力な水圧で洗浄出来ます。

舌用クリーナー
舌表面の汚れを洗い流すことが出来ます。

充電用USBケーブル(Type-C)
※ USB-ACコンセントは5V/2A以下のものを使用して下さい。(急速充電は出来ません。)

収納ケース


簡単マニュアル (電源ON/OFFとモード選択)

※使用の際は、お口の中に入れてから作動ボタンを押してください。


- **電源ON:** ブラッシングボタン(作動ボタン)又はフロスボタン(作動ボタン)を短く押すと電源が入ります。※ 前回使用したモードから作動します。
- **モード選択:** 運転開始後約5秒以内に再度同じ作動ボタンを押すとモードが切り替わり、お好みのモードに設定できます。※ 作動していないモードのボタンを押すと同時作動します。
- **運転メモリ機能:** いずれかのモードで5秒以上運転すると現行のモードが記憶され、次回電源を入れた際に同じモードで運転開始します。
- **電源OFF:** 5秒以上運転している場合、再度作動しているモードのボタンを短く押す。又は、運転開始後5秒以内に、作動しているモードのボタンを長押しすると停止します。

B 2in1 ブラシヘッドの使用法 <ブラッシングモード>


※ お風呂場や洗面台での使用をお勧めします。浴室中等での使用は可能ですが、水中での使用は対応しておりません。

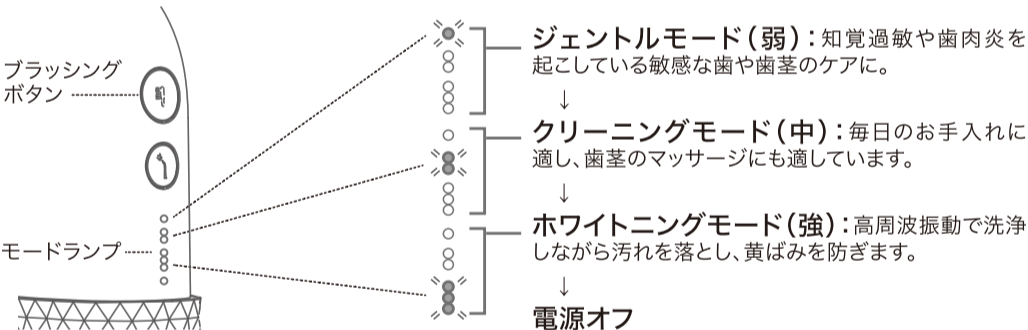

- 1 充電ベースから取り外し、本体からヘッドカバーを取り外します。
- 2 本体底面から給水パイプを引き出し、ヘッドカバーに水を入れ(40℃以下)取り付けます。

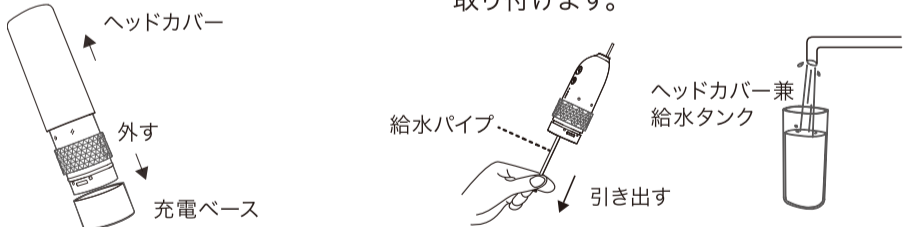


- 3 本体軸にブラシを取り付け、ブラシキャップを外します。
- 4 水が飛び散らないように軽く口を閉じ、ブラッシングボタンを押します。洗浄した水が洗面台の上へ流れ落ちるように洗浄して下さい。(前回使用したモードで運転開始)

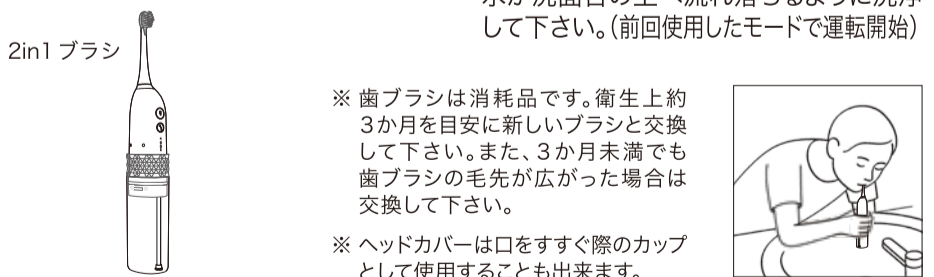

- 5 約30秒毎に一時停止し、磨き時間の目安をお知らせします。この動作を4回繰返すと(約2分間)完全に停止します。口腔内を上下左右で4分割するイメージで、一時停止毎にエリアを変えると口腔内を均等に磨くことが出来ます。

※ ブラッシングボタンを押した後フロスボタンを押すと、ノズル交換をせずに歯磨きと音波水流のウォーターフロスを同時に行えます。

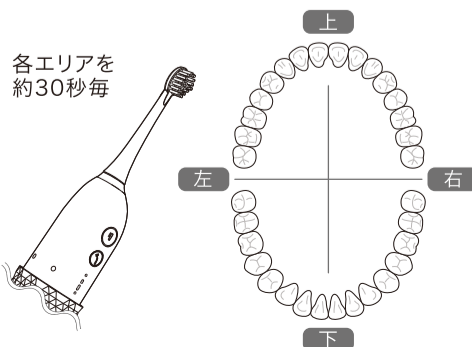


※ 歯ブラシは消耗品です。衛生上約3か月を目安に新しいブラシと交換して下さい。また、3か月未満でも歯ブラシの毛先が広がった場合は交換して下さい。


※ ヘッドカバーは口をすすぐ際のキャップとして使用することも出来ます。

C フロスノズル/舌用クリーナーの使用法 <フロスモード>


※ お風呂場や洗面台での使用をお勧めします。浴室中等での使用は可能ですが、水中での使用は対応しておりません。

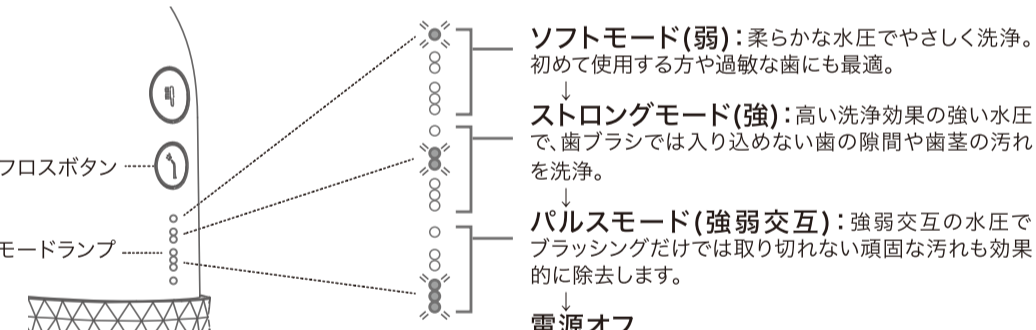

- 1 充電ベースから取り外し、本体からヘッドカバーを取り外します。
- 2 本体底面から給水パイプを引き出し、ヘッドカバーに水を入れ(40℃以下)取り付けます。

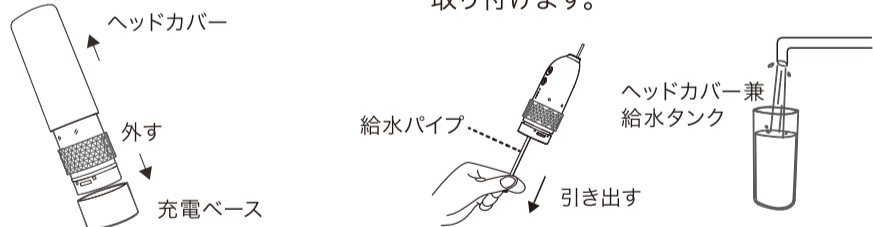


- 3 本体軸にフロスノズルまたは、舌用クリーナーを取り付けます。
- 4 水が飛び散らないように軽く口を閉じ、フロスボタンを押します。洗浄した水が洗面台の上へ流れ落ちるように洗浄して下さい。(前回使用したモードで運転開始)

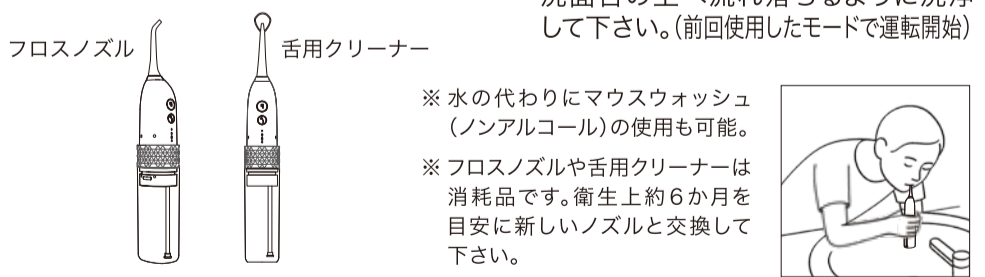

※ 水の代わりにマウスウォッシュ(ノンアルコール)の使用も可能。
※ フロスノズルや舌用クリーナーは消耗品です。衛生上約6か月を目安に新しいノズルと交換して下さい。

- 5 目的やケアに応じてお好みのモードを選択し洗浄します。

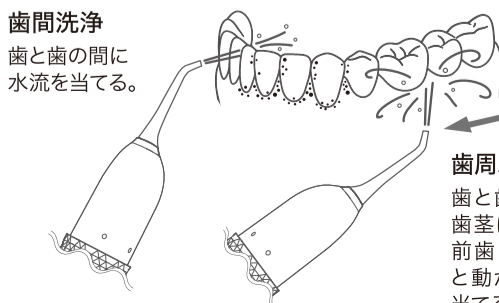

歯間洗浄
歯と歯の間に水流を当てる。

歯周ポケット洗浄
歯と歯茎の間を狙い、歯茎に沿って奥歯から前歯に向かいゆっくりと動かしながら水流を当てる。

舌の洗浄
舌用クリーナーを舌に軽く当てながら、奥から手前に向かって舌の表面汚れを洗い流して下さい。
※ 舌の表面を傷つける恐れがありますので、フロスノズルを舌の洗浄に使用するのをお止め下さい。



D ブラシやノズル等のUV除菌

UV除菌開始

ブラッシングボタンを長押し(約3秒間)すると、UVライトが点灯し除菌を開始します。


UV除菌終了(停止)

UVライト点灯後、約2分後に自動消灯します。また、UVライトが点灯中に再度ブラッシングボタンを押すと停止します。

除菌方法

ブラシやノズルを給水タンク内に上向きに入ると給水タンク内部と一緒に除菌可能です。

※週1回程度、2~3回繰返すことをお勧めします。

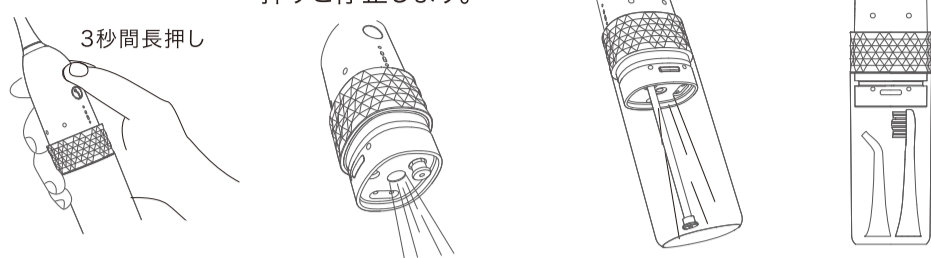


- ※ UV除菌中のご使用はお止め下さい。
- ※ 付属品以外のUV照射はお止め下さい。
- ※ UVライトを直接目に当てないで下さい。

E 充電方法 ※充電前に本体と充電ベースの水気を十分に乾かして下さい。

本体に充電ベースを設置し、側面の充電カバー内入力端子に充電用USBケーブル(Type-C)をしっかりと接続させ、USB-ACコンセント(別売)またはPC等のUSB端子に接続して充電して下さい。

充電中は本体の充電ランプが点滅し、充電が完了すると全点灯します。

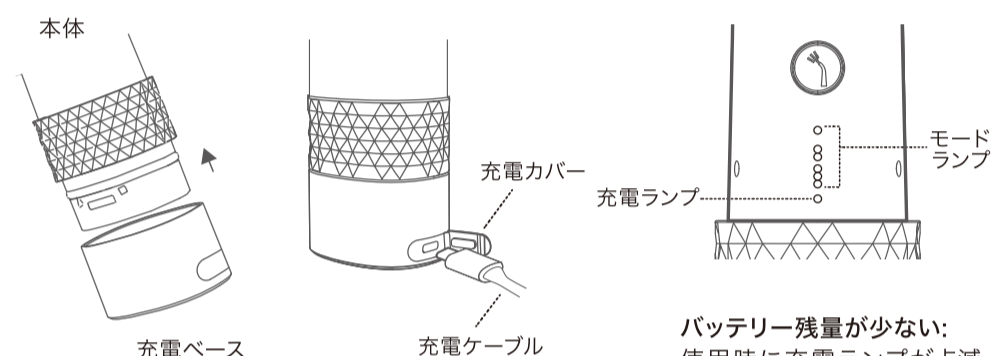

- ※ 充電中は本体と充電ベースを乾いた状態に保って下さい。
- ※ USB-ACコンセントは、5V/2A以下のものを使用して下さい。
- ※ 本品は急速充電(PD)非対応の為、高出力(急速充電)のものは使用出来ません。

H 使用上の注意と警告

リチウムイオン電池は使用方法を誤ると、ごく稀に破裂等の事故が発生する事がありますから、下記にご注意の上、安全にご使用下さい。

警告 死亡又は重傷などを負う恐れのある内容です。

- 過放電・過充電防止装置付ですが、電池残量灯が全灯表示(満充電)になったら、過充電を避けるためすぐに充電を中止。又、使用中に充電ランプが点滅していたら、過放電を避けるためすぐに再充電。台座に内蔵されている充電電池部が高温になったり、膨張したら、使用を中止し、お客様相談室に連絡。
- 製品の分解・修理・改造は禁止。
- 濡れた手でUSB-ACコンセントをコンセントから抜き差ししない。
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない。
- 電源プラグは、根元まで確実に差し込む。
- USB-ACコンセント・USBケーブルは水に浸けたり水洗いしない。
- USBケーブルは専用のもの以外を使ったり、他の機器の充電に使わない。
- ケーブルが傷んだりコンセントへの差し込みがゆるい時は使用しない。
- 掃除をするときは、USB-ACコンセントをコンセントから抜く。
- ほこりが付着しないように定期的に掃除する。(USB-ACコンセントを抜き、乾いた布で拭いて下さい)
- 異常・故障時には直ちに使用を中止する。(異常・故障例：破損、変形、異常に熱い、焦げ臭い、異音など)
- 乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させない。

注意 軽傷や物的損害を負う恐れのある内容です。

- ① USB端子・プラグにゴミやほこりが付着しないよう注意の上、USBプラグの根元を持って着脱する。(コードだけを持って引き抜かない。)
- ① 落としたり、ぶつけたり、投げたり、乱暴に扱わない。
- ① シンナー・アルコール・ベンジン・アルカリ性洗剤・漂白剤は使用しない。
- ① 本機は一般家庭用です。本来の使用用途以外、業務用等で使用された為に発生した故障や事故等の不具合については保障の対象外です。
- ① 改造、分解、修理をしない。
- ① 自身で操作が出来ない方に使用させない。
- ① 口腔内の感覚が弱い方は使用しない。
- ① 口腔洗浄以外の目的に使用しない。
- ① 給水タンクに40℃を超える温水を入れない。
- ① ブラシやノズル、舌用クリーナーは家族や他人と共用しない。
- ① 治療中の歯や口腔内に気になる症状のある人は、歯科医に相談の上使用する。
- ① 使用後は本体、給水タンク、ブラシ等を掃除し、乾燥させる。
- ① ドライヤーやファンヒーターなどの熱で本体を乾燥させないで下さい。

禁止 本機の取扱でしてはいけない内容です。

- ① 次の場所・環境では本機を使用しない：車の室内、プール・浴室等、水気や湿気がある場所/ガスコンロ・ストーブ等、高温になる機器の近く/炎天下等、45℃以上の高温になる場所/小さなお子様の手の届く場所/テレビやラジオ等AV機器の近く/障害物のある場所。もし異常に高温になったり、異音が出た場合は、直ちに使用を中止し、発売元にお問合わせ下さい。
- ① 本製品を水中に沈めたり、放置しない。
- ① 浴室や浴槽、シャワー又は水の入った他の容器やほこりの多い場所、不安定な場所、直射日光の当たる場所や屋外での充電や保管をしない。
- ① 温泉や入浴剤入りの浴槽、サウナで使用しない。

F クリーニングとメンテナンス

※ シンナーやアルコールなどの刺激性の洗浄剤は使用しないで下さい。製品の变色や故障の原因になります。

ブラシヘッド

使用後は毎回流水で洗い、自然乾燥して下さい。より快適にご使用頂く為に、毛先が広がった場合は、新しいブラシヘッドとご交換下さい。最低でも3か月を目安に交換することをお勧めします。

ノズル

使用後は毎回流水で洗い、自然乾燥して下さい。より快適にご使用頂く為に、最低でも6か月を目安に交換することをお勧めします。

本体

使用後は自然乾燥して下さい。流水での洗浄が可能ですが、50℃以上のお湯や洗浄剤の使用はお止め下さい。

充電

1回の満充電で約50日間使用可能ですが、手や本体の水気をよくとり定期的に充電して下さい。※ 長期間使用されていなかった場合、満充電表示でも再度充電してからご使用下さい。

給水タンク

給水タンクは取り外し可能な設計で、簡単に掃除できます。週に1回掃除することをお勧めします。落とさないで下さい。本体やブラシが破損している場合は使用しないで下さい。

G Q&A 故障かな?と思ったら

問題	原因	解決策
動かない	電池残量がない。	連続2時間以上充電して下さい。
途中で止まる	オートオフ機能が作動。	約2分間使用し続けると自動的に電源がオフになります。
	電池残量が少ない。	満充電にして下さい。
歯ブラシの音波振動が弱い	ジェントルモード(弱)に設定している。	動作モードを【中】または【強】に設定して下さい。
	電池残量が少ない。	満充電にして下さい。
ウォーターフロスの水圧が弱い	ソフトモード(弱)に設定している。	動作モードを【強】または【パルス】に設定して下さい。
	電池残量が少ない。	満充電にして下さい。
	ブラシヘッド使用時に毛先部分が倒れて水流穴を塞いでしまっている。	力を入れずに、歯や歯間に対してブラシが垂直になるように当てて下さい。
	ブラシヘッドの流水穴またはノズルに汚れが詰まっている。	新しいブラシヘッドやノズルに交換して下さい。
ウォーターフロスの水が出てこない	ブラシヘッドの流水穴またはノズルの先端が変形している。	新しいブラシヘッドやノズルに交換して下さい。
	金属製の給水パイプが引き出されていない。	給水パイプを引き出して下さい。
	給水タンクに水が入っていない。	給水タンクに水を入れて下さい。
血が出る	給水パイプに汚れが詰まっている。	水を2に対してお酢(ホワイトビネガー)1の割合で割ったものを3~5タンク分通して下さい。その後、水のみを同様に臭いが気にならなくなるまで通して下さい。
	口内に傷がある。歯茎が弱っている。	直ちに使用を止め歯科医師にご相談下さい。

I 保証規定(持ち込み修理)

取扱説明書に従い、正しく使用されたにもかかわらず、製品が故障した場合、下記規定に従って保証致します。お買上10日間以内の初期不良を除き、持込修理となりますから、製品受取後すぐに動作確認及び付属物が揃っているか、ご確認下さい。

保証書：本取扱説明書と、お買上時の領収書又は納品書の両方が、保証書となります。修理等をご依頼の際には、両方の書類のコピーをご提示下さい。ご提示が無い場合は保証致しかねますので、関係書類を大切に保管して下さい。

保証期間：お買上後12ヶ月。修理又は交換後も保証期間は最初のお買上後12ヶ月とします。お買上後10日以内に、判明した初期不良の場合は、当社にて商品を引取り、修理後お客様に返送しますので、お客様相談室にご連絡下さい。

保証内容：故障・不具合の原因が、製品の不良と判断された場合は、修理又は同等の代替品と交換させて頂きますが、それ以上の責は負いかねます。保証期間後に故障が発生し、修理不可能と判断された場合、ご希望により同等の製品を特別価格で提供させて頂く事もあります。

持込修理：修理ご希望の場合は、まず当社お客様相談室にご相談下さい。初期不良期間を除き、保証期間内であっても商品をお客様ご自身で当社へ直接お持ち込み頂くか、お客様のお手配にて送付頂く持込修理です。修理後の返送は、保証期間内の場合に限り送料当社負担にて手配致します。当社にて確認後、お申し出の不具合や故障が見られなかった場合や、その原因が誤った取り扱い等お客様の責となる場合は、修理費及び送料を着払いにて返送させて頂きますのでご了承下さい。又、当社の了承なく製品を着払いで送付された場合は受け取りをお断りしますのでご了承下さい。

有償修理：下記の場合には保証期間内でも有償修理とさせて頂きます。
①本取扱説明書記載の、ご使用者による初期点検(お届け時の動作確認)、定期点検をされていない時。
②お客様ご自身による改造・分解や修理を起因とする故障。
③不適当な取り扱い又は使用による故障。
④火災、地震、水害、異常気象他天変地異等、原因が本機以外の理由による故障又は損傷。
⑤ご使用後の外装面の傷、破損、外装部品、付属品の交換。
⑥取扱説明書通りに正しく使用されなかった場合。
⑦お買上を証明するレシート・納品書等の提示がない場合。

Li-ion リチウムイオン電池


リチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。リチウムイオン電池の廃棄については自治体にお問い合わせ頂くか、当社お客様相談室(03-3589-4555)までご連絡下さい。

PS E 電気用品安全法 認証品

本機はリチウム電池・AC電源等に関する電気用品安全法(PSE)に基づき認証済みです。詳しくは経済産業省のホームページをご覧ください。


<別売アクセサリー>

USB-AC
コンセント

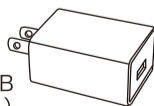


AC-USB
¥770(税込)

交換用
2in1ブラシ
3本セット

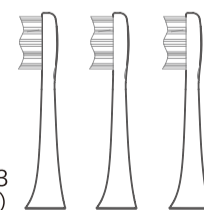

MAG-BRS-3
¥1,100(税込)

交換用
フロスノズル・
舌用クリーナー
セット

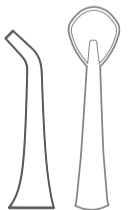

MAG-NOZ-2S
¥550(税込)

EXELUX 総販売元

健康・快適・安全を世界から
METEX
株式会社メテックス
〒106-0044 東京都港区東麻布3-3-9
アネックス麻布十番オフィス3階
TEL03-3589-3300 www.metex.co.jp/

お客様相談室

TEL: 03-3589-4555
(平日9:15~17:15)
FAX: 03-3589-5700 (24時間受付)
E-mail: metex-master@metex.co.jp



メテックス 検索

2025 Copyright by METEX All rights reserved.
本書の一部あるいは全部を無断で転載または複製(コピー)することを禁止します。

※ 本仕様は改善や改良のために予告なく変更されることがあります。※ 包装やカタログの色と実物の色とは、印刷の都合により異なることがあります。