

保証書

持込修理

お買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書記載の無料保証規定の範囲内で無料修理をさせていただきます。その際は、製品に本保証書を添えてお買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

品名	ネビウス エピレヴェール
品番	NE-221W
保証期間	お買い上げ日より 1年 (消耗品・付属品は除く)
お買い上げ日	年 月 日
お客様	お名前
	ご住所 〒
	TEL ()
販売店	店名・住所・TEL

【発売元】

株式会社 IBIS

〒100-0014 東京都千代田区永田町2-17-10

<https://ibistech.net/>

NEBEUS

保管用

保証書付

取扱説明書


〈家庭用光美容器〉

EPIREVEUR

エピレヴェール

NE-221W

海外兼用

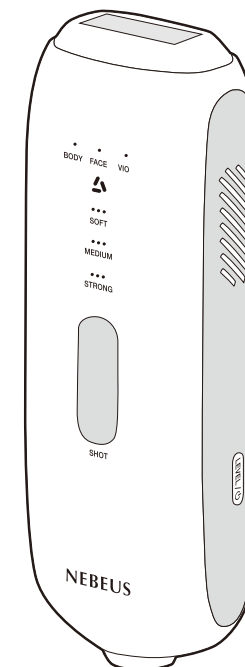

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。
- 保証書はこの取扱説明書に添付されています。「お買い上げ日・販売店」などの記入を確かめ、大切に保管してください。

もくじ




安全上のご注意	2～6
各部の名称・付属品	7
製品仕様	8
お使いになる前に	9～10
使いかた	11～13
オートオフ機能	13
各部位のケアのポイント	14
使い終わったら	15
海外で使用する前に	16
故障かな!?と思ったら	17～18
よくあるご質問	19～20
お客様相談窓口 保証とアフターサービス	21
無料保証規定	22
保証書	23

安全上のご注意



- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 - ここに示した注意事項は、ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するためのものです。
- いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



▷▷ 注意区分について ◁◁



誤った取り扱いをしたときに想定される危害や損害の程度を「警告・注意」と区分けしています。



 危険	人が死亡または重傷を負う危険性が高い内容を示します。
 警告	人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示します。
 注意	人が損害を負う可能性及び物的損害*の発生が想定される内容を示します。 ※物的損害とは、家屋・家財及び家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。







▷▷ 図記号について ◁◁




	⊘ 記号は、してはいけない内容を示します。
	❗ 記号は、しなければならない内容を示します。

 危険	
	<ul style="list-style-type: none"> ●次に該当する人は使用しないでください。医用電気機器の誤作動を招く恐れがあります。 <ul style="list-style-type: none"> ・医用電気機器（ペースメーカーなどの体内植込式医用電気機器・人工心肺などの生命維持用医用電気機器・心電計などの装着型医用電気機器）を使用している人

 警告	
	<ul style="list-style-type: none"> ●次のような人は使用しないでください。事故やトラブルの原因となります。 <ul style="list-style-type: none"> ・心臓疾患、障害及びその疑いがある人 ・幼児や自分で意思表示ができない人 ・温度や刺激の感覚が自覚できない人 ・妊娠中、授乳中の人・自己免疫疾患のある人 ・黒皮症の人・てんかんの疾患がある人・光過敏症の人 ・光線力学療法などで光増感剤を使用している人 ●次のような人はご使用前に医師にご相談ください。 <ul style="list-style-type: none"> ・急性疾患の人・感染症疾患の人・悪性腫瘍のある人 ・有熱性疾患の人・高血圧の人や血液疾患のある人 ・発熱している人 ・糖尿病などの高度な末しょう循環機能障害による知覚障害のある人 ・神経障害のある人・皮膚病及びアトピー性皮膚炎の人 ・通院して薬を服用中の人 ・アレルギー体質、接触性皮膚炎など、皮膚に既往症のある人 ・使用に際してお肌に不安のある人 ●次のような部位や場合には使用しないでください。事故やトラブルの原因となります。 <ul style="list-style-type: none"> ・お肌に傷や発疹、炎症、かゆみなどの異常がある部位 ・口内や陰部、粘膜など・眼球・まぶた・のど ・膨らんだホクロ・ウイルス性のイボ・骨折をした部位 ・美容医療施術後に内出血や腫れ、かさぶたなどのある部位 ・傷跡やシミなどの色の濃い部分 ・眉・額・頭髮・目・耳・乳首・乳輪・へそ内部 ・大動脈など血管が見える部位 ・刺青、タトゥー、ボディペイントをしている部位 ・酒気帯びの場合、体調がすぐれない場合 <p>※ご自身で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。</p>


 警告	
	<ul style="list-style-type: none"> ●吸気口や排気口をふさいだまま使用しないでください。発熱・発火・やけどの原因となります。 ●過剰な連続使用をしないでください。けがや故障の原因となります。 ●目の近くや暗い部屋で使用しないでください。目を傷める原因となります。 ●フラッシュ照射口を直視しないでください。また子供や周囲の人が見ないようにしてください。目を傷める原因となります。 ●子供や身体の不自由な人だけで使用させないでください。未成年の方は保護者同意のうえ、保護者監視のもと使用してください。事故やけがの原因となります。 ●専用の電源アダプター以外は使用しないでください。感電・ショート・発火・故障の原因となります。 ●電源アダプターが傷んだり、コンセントの差込がゆるい時は使用しないでください。感電・ショート・発火・故障の原因となります。 ●電源アダプターを引っ張って本体を移動させたり、持ち上げたりしないでください。感電・ショート・発火・故障の原因となります。 ●タコ足配線はしないでください。感電・ショート・発火・故障の原因となります。 ●電源コードを本体や電源アダプターに巻きつけたり、傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、挟み込んだりしないでください。また、重いものをのせたりしないでください。感電・ショート・発火・火災の原因となります。 ●使用中に電源アダプターをコンセントから抜いたり、本体からアダプタープラグを抜かないでください。感電・ショート・発火・火災の原因となります。 ●本体に重いものを乗せたり、落下させたりなど強い衝撃を与えないでください。けが・故障・破損などの原因となります。

 警告	
	●取扱説明書に記載されている用途以外には使用しないでください。けがや故障の原因となります。
	●次のような場所で使用や保管をしないでください。爆発・発火・火災・感電・ショート・故障の原因となります。 <ul style="list-style-type: none"> ・火のそばや炎天下・発熱器具や引火性のもの（アルコール、シンナー、スプレーなど）の近くなど高温になる場所 ・温度変化の激しい場所（エアコン、暖房器具の側など） ・浴室などの湿気の多い場所・水などのかかる場所 ・油煙、湯気の当たる場所・ほこりの多い場所 ・直射日光の当たる場所・傾斜、振動、衝撃のある場所 ・強い電波や磁気の発生する場所
	●吸気口にほこりやごみなどが付着したまま使用しないでください。発火・故障の原因となります。
	●分解、改造をしないでください。火災・感電・けが・故障の原因となります。
	●本体や電源アダプターを水につけたり、水をかけたり、水洗いをしないでください。また、濡れた手で触らないでください。感電・ショート・発火・故障の原因となります。
	●必ず、交流 100V～240V で使用してください。また電源アダプターは根元まで確実に差し込んでください。火災・感電・事故の原因となります。
	●ファンが作動しない（「ブーン」と音がしない）、本体や電源アダプターが異常に熱い、異音、異臭がするなどの異常が発生したらすぐに使用を中止し、本書記載（P21）のお客様相談窓口までご連絡ください。発煙・発火・故障・けがの原因となります。
	●ご使用の際は、必ず付属のアイプロテクターを装着してください。目を傷める原因となります。
	●乳幼児の手の届かない場所に保管してください。けがの原因となります。
	●電源アダプターを抜く時は、必ず電源アダプター本体を持って引き抜いてください。感電・ショート・発火の原因となります。


 注意	
	●使用前にフラッシュ照射口の割れ、変形、破損がないか確認し、破損・故障している場合は使用しないでください。肌トラブルや症状悪化の原因となります。
	●ファンデーションなどメイクアップ用品をつけた状態で使用しないでください。また濡れた肌には使用しないでください。肌トラブルの原因となります。
	●一回のケアで同じ箇所を何度も照射しないでください。お肌を傷める原因となります。
	●日焼け直後やピーリング、パックケアとの併用はしないでください。肌トラブルの原因となります。
	●ケア直後の場所に香水やメイクアップ化粧品を使用しないでください（保湿のためのクリームやローションは除く）。肌トラブルの原因となります。
	●ペットには使用しないでください。けがの原因となります。
	●衣類や頭髮、物に照射しないでください。焦げ、変色、破損の原因となります。
	●電源をオンにした状態で他の電気製品（美容機器など）と接触や同時使用はしないでください。事故や誤動作の原因となります。
	●本体をアルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かないでください。本体の表面に損傷を与える原因となります。
	●ご使用になる部位に合わせて、付属のフィルターを差し替えて使用してください。肌トラブルの原因となります。
	●初めて使用する時や本製品のご使用に慣れるまでは、必ず最小レベル（SOFT）で使用してください。事故やけがの原因となります。
	●お肌に異常が生じてないか、よく注意して使用してください。お肌に合わない時はご使用をおやめください。
	●必ずムダ毛を除毛してから使用してください。ムダ毛を除毛せずに使用すると、毛くずが製品に付着して焦げの原因となります。
	●使用後は、毎回 P15「使い終わったら（お掃除のしかた）」を参照して、製品に付着した毛くずや汚れなどを取り除いてください。故障や肌トラブルの原因となります。

各部の名称・付属品

■本体

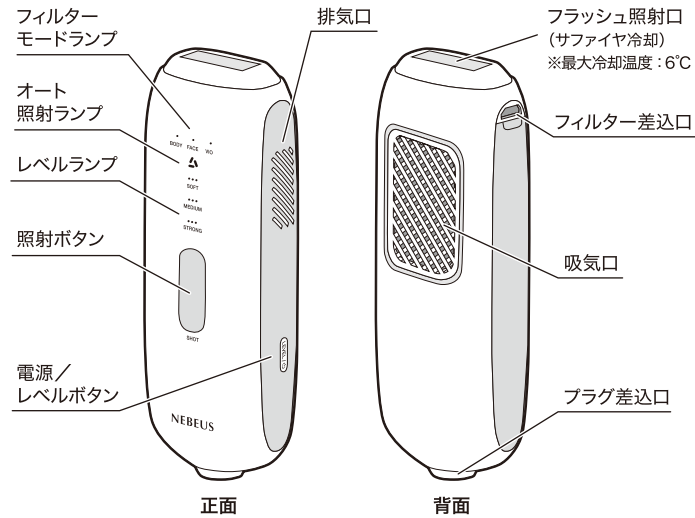

■付属品

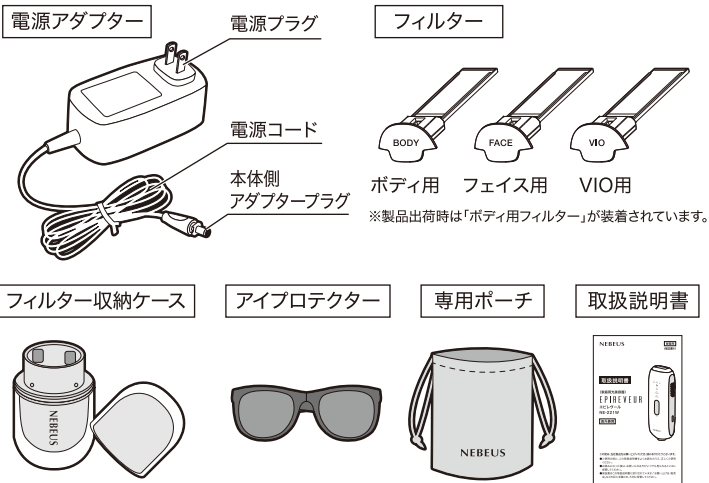

製品仕様

■本体

型名	NE-221W	本体質量	約326g(電源アダプター除く)
電源方式	交流式	コードの長さ	約1.5m
定格電圧	AC100-240V 50-60Hz	生産国	中国
消費電力	60W	本体材質	ABS、PC
本体サイズ	約L177× W67×H40mm		
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ◎電源アダプター …… 1個 ◎フィルター …… 3個 (ボディ用、フェイス用、VIO用) ◎フィルター収納ケース …… 1個 ◎アイプロテクター …… 1個 ◎専用ポーチ …… 1個 ◎取扱説明書 …… 1部 		

※ 製品の仕様は、性能向上のため予告なく変更する場合があります。

お使いになる前に

本製品をお使いになる前に、以下の内容を必ず確認してください。

ケア前の準備

①ケアする部分のムダ毛を処理する

ケアする部分の毛を事前に剃る。



- 事前に体毛を剃らなかつたり、剃り方が不十分だったりすると肌トラブルが生じる恐れがあります。
- 毛抜き、ワックスなどを使用した脱毛は行わないでください。

②フラッシュ照射口に異常がないか確認する



- フラッシュ照射口に割れや破損、変形がある場合は使用しないでください。
- フラッシュ照射口が汚れている場合は、柔らかい布などで拭き取ってください。(P15「使い終わったら(お掃除のしかた)」参照)

お肌への照射テスト

本製品を初めてご使用になるときは、肌トラブル防止のため、必ず事前に照射テストを行ってください。

①照射テストする箇所を選ぶ

②フィルターを本体に挿入する

ケアしたい箇所に適したフィルターを選び、本体に挿入する。
(フィルターの挿入のしかたは、P11「使いかた」参照)

③テストする部位に照射する

ケアしたい部位付近の目立たない箇所に最小レベル(SOFT)から照射する。
(操作方法は、P11-P12「使いかた」参照)



- 製品が扱いにくい部分や肌が敏感な箇所では、照射テストを行わないでください。
- 同じ箇所に照射テストをしないでください。必ず照射箇所をずらして照射テストを行ってください。

④お肌に異常が無いことを確認する

照射テスト後、24時間経ってからお肌に異常がないか確認する。



- 実施部位に発赤、痛み、かゆみ、刺激などの異常が見られた場合は、異常が起きなかった出力レベルを選んで今後のケアを行ってください。
- 肌に発赤や強い痛みが2日以上続く場合は、医師にご相談ください。
- 日焼けなどで肌の色が変わった場合は、再度照射テストを行ってください。

ケアの頻度について

最適なケアの頻度は、個人の体質や身体の部位によっても差があります。効果が感じられない場合は、ケアの頻度を上げるなど必要に応じてご使用ください。

使用部位	最初の2ヶ月	3ヶ月目以降
ボディ	2週間に1度 ※効果が感じにくい場合は、 3日に1度を限度に使用	4~8週間に1度 ※効果が感じにくい場合は、 3日に1度を限度に使用
V.I.O		
顔(女性)	3日に1度	
顔(男性)	3日に1度	

※本製品は永久脱毛をするためのものではありません。

ケアを中止するとムダ毛の量は徐々に元に戻ります。

※同じ部位に1日2回以上、フラッシュを照射しないでください。

※しばらく使用しなかった場合は、最初の2ヶ月と同じ頻度で再開してください。



- 上記頻度を超過して使用する場合は、必ずお肌の状態を確認しながら使用してください。また1日の使用回数は必ず守ってください。肌トラブルの原因となります。

使用禁止部位について

ケアする際は、以下の部位には使用しないでください。

(右図の■部位)

眼球、まぶた、目の周り、眉周り、額、頭髮、耳、唇、口内、喉、首

〈下記のような箇所にも使用しないでください〉

- ◆乳首、乳輪、へそ、陰部、肛門、粘膜
- ◆ウィルス性のイボ、膨らんだホクロ、骨折をした部位、美容医療施術後に内出血や腫れ・かさぶたなどのある部位
- ◆傷や発疹、かゆみ、炎症など皮膚に異常が見られる箇所、大静脈など血管が見える箇所、シミ、濃い色素斑の見られる箇所
- ◆刺青、タトゥー、ボディペイント、アートメイクのある箇所
- ◆長時間効果が持続する制汗剤を使用している箇所




使いかた

① ケアしたい箇所のフィルターを本体に装着する


ケアしたい箇所に適したフィルターを選び、本体のフィルター差込口にフィルターを挿入する。

※フラッシュ照射口やフィルターに汚れやごみなどが付着している場合は、柔らかい布などで拭き取ってください。

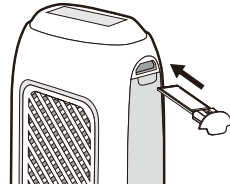

② 電源アダプターと本体を接続する

本体側アダプタープラグに表示されている▲面を上側にして、本体のプラグ差込口にアダプタープラグを差し込み、90度回転させる。

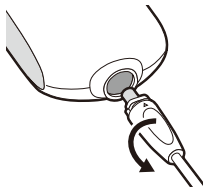

③ 電源アダプターをコンセントに差し込む

3つのレベルランプが点滅し、スタンバイ状態になります。


注意 ●電源アダプターはタコ足配線せず、壁面コンセントに直接差し込んでください。感電・ショート・発火・故障の原因となります。

④ 「電源/レベルボタン」を長押し(約2秒)して、電源を入れる

選択したフィルターのフィルターモードランプとレベルランプ(SOFT)が点灯します。

※電源がオンになると、自動で本体内部のファンが「ブーン」と回り始めます。故障ではありません。


※フィルターが本体に挿入されていない場合、全てのランプが点滅し、全てのボタン操作ができなくなります。

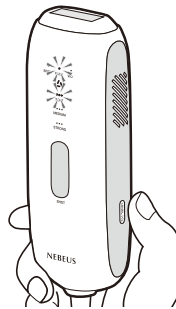

⑤ 「電源/レベルボタン」を押して、照射レベルを選択する

照射レベルは、「SOFT/MEDIUM/STRONG」の3段階あります。ボタンを押すたびに、照射レベルが切り替わります。

注意 ●初めて使用する時や本製品のご使用に慣れるまでは、必ず最小レベル(SOFT)で使用してください。事故やけがの原因となります。

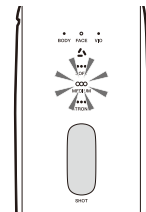

照射レベル
〈「MEDIUM」設定例〉

⑥ フラッシュ照射口をお肌にしっかりとあて、「照射ボタン」を押す

※フラッシュ照射口がお肌にしっかりとあたっていないと、フラッシュ照射はされません。〈レベルランプが点滅から点灯に変わると照射できます。(肌検知機能)〉

※フラッシュ照射の際は、必ず付属のアイプロテクターを装着してください。

※一回一回の照射に数秒のチャージ時間がかかります。(レベルランプ点滅)



肌検知機能

90°

レベルランプ点灯

×

レベルランプ点滅

オート照射モード

おすすめの部位/
足や腕などのケア範囲の広い部位

照射ボタンで、フラッシュが一定間隔で自動照射されるオート照射モードの設定が可能です。

オート照射設定
照射ボタン長押し(約2秒) → オート照射ランプ点灯

切替

オート照射解除
照射ボタン長押し(約2秒) → オート照射ランプ消灯



※連続照射することにより数秒のチャージ時間がかかります。(レベルランプ点灯)

※一箇所に照射したら、次の箇所へと移動させてご使用ください。

注意

- 使用前にフラッシュ照射口やフィルターの割れ、変形、破損、汚れがないか確認してください。破損・故障している場合は使用を中止し、汚れがある場合は乾いた布などで拭き取ってください。肌トラブルや症状悪化の原因となります。
- 吸気口や排気口をふさいだまま使用しないでください。発熱・発火・やけどの原因となります。
- フラッシュ照射口を直視しないでください。また子供や周囲の人が見ないようにしてください。目を傷める原因となります。
- 強く押しあてず、一ヶ所に集中して使用しないでください。肌を傷める原因となります。
- 熱く感じた場合は、フラッシュ照射口を肌から離してください。

⑦ 少しずつ照射位置を変えながら、ケアを行う

※フラッシュ照射口の大きさが一度にケアできる範囲です。

注意

- 一回のケアで同じ箇所を何度も照射しないでください。お肌を傷める原因となります。
- お肌に異常が生じてないか、よく注意して使用してください。お肌に合わない時はご使用をおやめください。


使いかた

⑧ケアが終了したら、「電源/レベルボタン」を長押し(約2秒)して電源を切る

電源オフ後は、3つのレベルランプが点滅し、本体内部の熱を逃すため、ファンが約15秒後に停止します。

⑨お手持ちのスキンケア商品で照射した肌を保湿する

※ケア後にほてりやかゆみを感じる場合は、保冷剤や濡れたタオルなどで肌を冷やしてください。

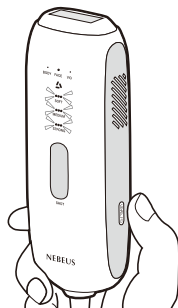

⑩使用後は電源アダプターをコンセントと本体から抜き、本体をお掃除する

※P15「使い終わったら(お掃除のしかた)」に従って、毎回ご使用ごとにお掃除をしてください。
※ご使用後、本体は専用のポーチに入れて保管してください。



注意

- 電源コードを本体や電源アダプターに巻きつけて保管しないでください。ショート・火災・感電の原因となります。
- 電源アダプターは、電源を切った後にコンセントから引き抜いてください。故障の原因となります。

オートオフ機能

ご使用後、電源/レベルボタンを押さなくても、電源を入れたまま放置すると約10分後に自動的に電源が切れます。

電源オフ後は、3つのレベルランプが点滅します。

各部位のケアのポイント

ケアを行うときは、以下のポイントに注意しながら行ってください。

【ワキのケア】

- ケア前にワキについている制汗剤、香水、クリームなどの化粧品をきれいに拭き取る。
- 鏡を見ながら使用する。(お手入れ箇所が見やすくなり、ケアがしやすくなります)
- 皮膚がたるみやすい部位のため、指で肌を伸ばしながらケアする。
- 皮膚が柔らかい部位のため、フラッシュ照射口を強くあて過ぎない。(強くあて過ぎると熱く感じる場合があります)

【腕・足のケア】

- ケア範囲が広いので、自動で連続照射してくれる「オート照射モード」でのケアがおすすめ。
- 関節周りや突起のある部位は無理にケアしない。(他の部分より痛みを感じやすく赤みが出やすくなる場合があります)
- フラッシュ照射口がしっかりふさがるように、本体を縦にあててケアする。

【顔のケア】

- メイクを落とし、清潔な肌に使用する。
- 鼻下のヒゲ、顎ヒゲなどの狭い部分や角度の急な部分に使用するときは、使用箇所の肌を伸ばすようにケアする。
- ケア直後は直射日光にあたることを避け、またケアをしている期間は日焼けをしないようにする。
- 使用後は化粧水などで肌を保湿する。

【V.I.Oゾーンのケア】

- 色素沈着が起きている部分や肌の色が濃い部分は、低いレベルでケアする。



注意

- P10「使用禁止部位について」記載の部位には使用しないでください。事故やトラブルの原因となります。

使い終わったら

お掃除のしかた

本製品の性能を最適に保つために、ご使用ごとに毎回お掃除をしてください。

【本体】

- 水で湿らせて、固く絞った布などで汚れを拭き取る。
※汚れが落ちにくい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。
- フラッシュ照射口は、乾いた柔らかい布でやさしく拭き取る。
※フラッシュ照射口は水拭きしないでください。フラッシュの性能低下、故障、肌トラブルの原因となります。
- 吸気口は、歯ブラシや掃除機などで汚れを取り除き、乾いた柔らかい布でやさしく拭き取る。

【フィルター】

- 乾いた柔らかい布でやさしく拭き取る。
※フィルターは水拭きしないでください。フラッシュの性能低下、故障、肌トラブルの原因となります。



注意

- お手入れは、必ず電源アダプターを本体と壁面コンセントから抜いた状態で行ってください。感電・ショート・発火の原因となります。
- 本体や電源アダプターは絶対に濡らさないでください。故障・感電・ショート・発火の原因となります。
- アルカリ洗剤やアルコール、ベンジン、シンナー、除光液などは使用しないでください。器具を傷める恐れがあります。
- 汚れや水分が残った状態で放置しないでください。カビや変色、においの原因となる恐れがあります。


保管のしかた

- ご使用后、本体は専用ポーチに入れて収納してください。
- 長期間使用しないときは、本体やフィルターのお掃除をしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源を切り、電源アダプターを壁面コンセントから抜いて保管してください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 直射日光のあたる場所、高温多湿、水気の近くは避けて保管してください。

海外で使用する前に

この商品は、100-240V対応A-2プラグ仕様です。
A-2プラグ以外の地域では、プラグアダプターを別途ご準備ください。
(変圧器は不要です)

●プラグアダプターの種類

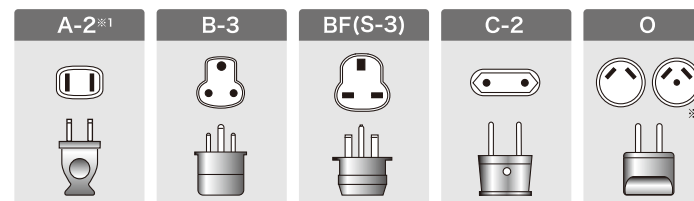

※1: 日本国内もA-2タイプのプラグ形状です。

※2: アース付タイプも使用できます。

●主な国/地域の代表的なプラグ

地域	国/地域	プラグ
北米	アメリカ合衆国	A-2
	カナダ	A-2, BF
	ハワイ	A-2
ヨーロッパ	イギリス	B-3, BF, O
	イタリア	C-2
	オーストリア	C-2, B-3
	オランダ	C-2
	ギリシャ	C-2, B-3
	スイス	C-2, B-3, BF
	スウェーデン	C-2
	スペイン	A-2, C-2
	デンマーク	C-2
	ドイツ	C-2
	ノルウェー	C-2
	ハンガリー	C-2
	フィンランド	C-2
	フランス	C-2, O
ベルギー	C-2	
オセアニア	ロシア	A-2, C-2
	オーストラリア	O
	グアム島	A-2
	サイパン島	A-2
	トンガ	O
	ニュージーランド	O
	フィジー	A-2, C-2, O

地域	国/地域	プラグ
アジア	日本	A-2
	インド	C-2, B-3, BF
	インドネシア	A-2, C-2, B-3, BF
	シンガポール	B-3, BF
	タイ	A-2, C-2, BF
	大韓民国	A-2, C-2, BF, O
	台湾	A-2, O
	中華人民共和国	A-2, C-2, B-3, BF, O
	フィリピン	A-2, C-2, B-3, BF, O
	ベトナム	A-2, C-2
	香港特別行政区	C-2, B-3, BF
	マカオ特別行政区	A-2, C-2, B-3
	マレーシア	C-2, B-3, BF
	アルゼンチン	C-2, BF, O
中南米	プエルトリコ	A-2
	ブラジル	A-2, C-2
	メキシコ	A-2
中東・アフリカ	アラブ首長国連邦	C-2, B-3, BF
	エジプト	C-2, B-3, BF
	クウェート	C-2, B-3, BF
	トルコ	A-2, C-2
	南アフリカ共和国	C-2, B-3, BF
モロッコ	C-2	