


添付文書
取扱説明書
家庭用低周波治療器 NK5020

家庭用
機械器具 78 家庭用電気治療器
医療機器認証番号
301AKBZX00057000

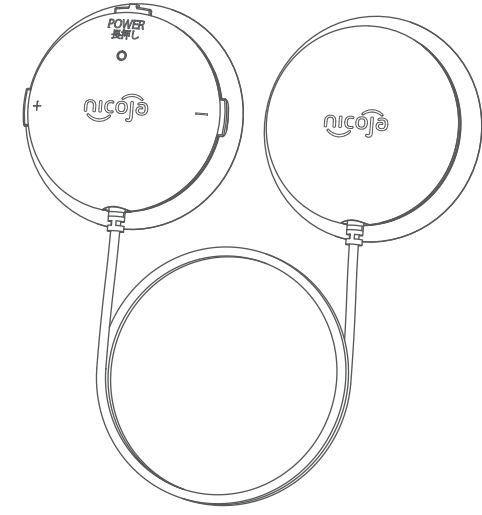

保管用
保証書付き
2020年4月15日作成 (第3版)

●このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。
ご使用前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特長
本製品は、スマートフォンを使って手で簡単に操作が行える家庭用低周波治療器です。

使用目的又は効果
肩こりの緩解、麻痺した筋肉の弛緩の予防及びマッサージ効果

安全上のご注意 ~必ずお守りください~
ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

- 危険** 「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。
- 警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
- 注意** 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

<お守りいただく内容を次の図記号で説明しています>

 してはいけない内容です。 実行しなければならない内容です。

●本取扱説明書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることのできる場所に、必ず保管してください。

危険
●次のような医用電気機器との併用は絶対にしない。
(1)ペースメーカー、植込み型除細動器などの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器
(2)心電計などの装着形の医用電気機器

- 警告**
- 次の人は、使用前に医師と相談してください。
(1)悪性腫瘍のある人
(2)心臓や脳神経に異常のある人
(3)妊娠している人、出産直後の人
(4)糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害のある人
(5)体温38℃以上(有熱期)の人(例 急性炎症症状[倦怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱している場合)
 - (6)安静を必要とする人
 - (7)脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人
 - (8)皮膚知覚障害、または皮膚に異常(感染症、創傷など)のある人
 - 使用によって、発疹、発赤、かゆみなどの症状があらわれた場合は、使用を中止し医師に相談してください。
 - 使用中、ゲルシートにネックレスやベルトなどの金属が触れないようにしてください。
 - ★事故や体調不良をおこすおそれがあります。
- 禁止**
- 乳幼児や子供、身体の不自由な人には付き添いなしでは使用しないでください。
 - 心臓近く、頭部、顔、口の中、陰部、皮膚疾患の場所などには使用しないでください。
 - 就寝時には使用しないでください。
 - 身体及び機器に異常を感じたときには、使用を直ちに中止してください。
 - ★事故やけがのおそれがあります。
 - 他の治療機器と同時に使用しないでください。
 - 浴室など湿気の多い所、水のかけやすい所での使用は危険ですので絶対にしないでください。
 - ★強いショックを受けたり、やけどしたりするおそれがあります。
- 禁止**
- ACアダプターに他の製品を接続して使用しないでください。
 - 機器は改造しないでください。
 - 機器が故障した場合は、勝手に修理などせず、販売店又は製造販売元に連絡してください。
 - ★発火や感電・けがの原因になります。

- 注意**
- 使用前にスイッチが正しく動作するか確認してください。
 - しばらく使用しなかったときは、機器が正常かつ安全に動作することを確認してください。
 - パッド(本体)は治療する部位に正しく装着してください(正しく装着していない状態では、低周波電流は流れません)。
 - 同一箇所への使用は20分以内にしてください。
 - しばらく使用しても効果が現れない場合は医師又は専門家に相談してください。
 - 機器に故障を発見した場合、すぐに使用を中止し、電源を切ってください。
 - 使用後はパッド(本体)を治療部位から外し、保管用シートに貼って、収納ポーチに入れて保管してください。
 - パッド(本体)の充電は必ず専用のACアダプター、USBケーブルを使用し行ってください。
 - 充電する際はUSBケーブルを正しく、かつ確実に接続してください。
 - USBケーブルを取り外すときは、コード部分を持つのではなく、プラグ部分を持って引き抜いてください。
 - 治療する部位がぬれている場合は、必ず水分をふき取ってください。
 - 無線LAN、電子レンジ、無線機器などの周辺で使用すると、電波干渉が発生する可能性があります。電波干渉が発生しスマートフォンとの通信がうまくできない場合、使用しない機器を停止するか、使用場所を変えるなど電波干渉の生じない環境で使用してください。
- 禁止**
- 幼児の手が届く場所に置いたり、保管したりしないでください。
 - お手入れするときにベンジンやシンナー、アルコールなどは使用しないでください。
 - ぬれた手で操作したり、ぬれた部位に使用しないでください。
 - パッド(本体)および付属品を踏みついたり、強い衝撃を与えないでください。
 - パッド(本体)および付属品に水などをこぼさないでください。
 - 自動車などの運転の直前および運転中には使用しないでください。
 - ゲルシートを患部にはりつけたまま放置しないでください。
 - 子供には使用せず、パッド(本体)の上に乗らせたり遊ばさないでください。
 - 付属のACアダプター、USBケーブルはパッド(本体)の充電以外には使用しないでください。

製品構成

■パッド(本体)

■付属品

- ACアダプター(専用) (品番:K05S050040)
- USBケーブル(専用)
- ゲルシート※×4 ※ゲルシートは消耗品です。
- 保管用シート×2
- 収納ポーチ
- 取扱説明書・保証書 アプリインストール手順書

充電の仕方

- 初めてご使用になる際は、パッド(本体)を充電してからご使用ください。
- 電源は必ず交流100Vで、付属のACアダプターをご使用ください。

1. パッド(本体)とACアダプターをUSBケーブルで接続し、電源プラグをコンセントに差し込む。

充電中 → 充電完了

表示ランプが赤色で点灯します。 → 表示ランプが緑色で点灯します。

※プラグの向きにご注意ください。無理に差し込むと、故障の原因になります。

・充電時間は、最長で約3.5時間です。
・1回15分で、約10回使用できます(使用条件によって、使用回数が少なくなることがあります)。
・リチウムイオン電池には寿命があります(電池寿命は使用・保管状態により大きく変化します。取扱説明書に従ってご使用されても、使用回数が極端に少なくなった場合、電池の寿命が考えられます)。

保証書

販売名	家庭用低周波治療器 NK5020
保証期間	お買い上げより1年間
お買い上げ	年 月 日
お客様	〒□□□-□□□□ ご住所
	お名前 様
	お電話 ()
販売店	住所・店名
	電話 ()

本品は裏面記載の無料修理規定内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は裏面の無料修理規定に記載しております。ご参照ください。販売店欄に記入のない場合は、有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし記入のない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

NIKKO SEIKI CO., LTD.
日光精器株式会社
〒523-0022 滋賀県近江八幡市馬淵町2660
TEL(0120)250-846 (フリーダイヤル) / FAX(0748)37-2015

充電の仕方

2. 充電完了後、ACアダプターをコンセントから抜き、USBケーブルをパッド(本体)とACアダプターから抜く。

microUSBプラグを抜く
USBプラグを抜く

本製品は、リチウムイオン電池を使用しています。性能を十分に保つため、次のことを守ってください。

- 使用の都度充電しないでください。毎日ご使用される場合は、1週間に1回充電してください。アプリ画面に、「パッド充電不足」のポップアップが表示された場合は充電を完了させてからご使用ください。
- パッド(本体)の電源ボタンを長押し(約2秒以上)した際、表示ランプが赤色で点滅した場合は充電を完了させてからご使用ください。
- 周囲温度が0~40℃環境で充電してください。電池の性質上、低温や高温では電池性能が低下する場合があります。
- 湿気の少ないところに整理、保管してください。40℃以上の暑い場所や0℃以下の寒い場所での保管は避けてください。

使い方①

■アプリをダウンロード・インストールする

App StoreまたはGoogle Playから「スマート低周波」を検索し、アプリをダウンロード・インストールする。
★詳細はアプリインストール手順書を参照してください。

推奨の端末OSバージョン:iOS ver11以上/Android ver5.0以上

■治療する

1. パッド(本体)の出力端子とゲルシートの通電端子を接続する。

出力端子
通電端子
パッド(本体) ゲルシート 接続後

2. ゲルシートの透明フィルムをゆっくりはがす。

透明フィルム

使い方②

■治療する

3. パッド(本体)のPOWERボタンを長押し(約2秒以上)、電源を入れる。

POWERボタン
長押し(約2秒間)
表示ランプが緑色で点灯 ※赤色で点滅した場合は、充電をしてください

4. 使用したい部位にパッド(本体)を装着する。

警告

- ★ネックレスや金属製アクセサリを外してください。
- ★パッド(本体)の貼り付けは、肌の汗、水分、汚れを拭き取ってから行ってください(粘着力が低下するおそれがあります)。
- ★必ず2パッド貼って使用してください(片方だけでは動作しません)。

●部別装着例 ※心臓近くや頭部、顔などには使用しないでください。

首 肩 背中
腕 足 腰

※首は首もとにご使用ください

警告

本器は2パッド仕様ですが、左図のような両腕・両足の使用は絶対にしないでください。
★心臓に負担が生じるおそれがあります。

使い方③

■治療する

5. スマートフォンのBluetooth機能がONになっていることを確認する。
6. 「nicoja」アプリを開く。
7. 「nicoja」ロゴの立ち上げ画面が表示される(自動でペアリングを行い、メニュー画面へ切り替わります)。

【アプリ立ち上げ画面】

【パッド(本体)の電源が入っていない場合】

上図のアプリ立ち上げ画面に「本体の電源をONにしてください!」のポップアップが表示されます(パッド(本体)の電源を入れると自動でポップアップが消えます)。

本体の電源をONにしてください!

◀「nicoja」ロゴの立ち上げ画面から次に移行しない場合▶

①「nicoja」アプリを閉じ、再度アプリを開いてください。
②上記①で解決しない場合、アプリをアンインストールし再度アプリをダウンロードしてインストールしてください。

使い方④

■治療する

8. 「ペアリング完了しました!」のポップアップをタップする(ペアリングはアプリを立ち上げた際に自動で行われます)。

●正常にペアリングされていることを、下記ご確認ください。
★アプリ画面に「ペアリング完了しました!」のポップアップが表示される。
★パッド(本体)の表示ランプが緑色に点滅している。

【正常にペアリングされない場合】

※アプリ画面に通信エラーメッセージが表示されます。13ページをご確認ください。

※AndroidはBluetoothの仕様上、位置情報(GPS)をONにする必要があります。OFFの場合、右図の「位置情報(GPS)をONにしてください!」のポップアップが表示されます。

位置情報(GPS)をONにしてください!

