

お肌の“Okue<sup>®</sup>”届けるお手伝い。  
\*角質層まで



美容液の肌浸透を助ける浸透促進ボトル

OKUE.<sup>®</sup>

MAGIC BOTTLE

Please enjoy the products. You never know, maybe that's the day she has a date with destiny.

And it's best to be as pretty as possible for destiny.


# 毎日のスキンケア、頑張っているのに...なぜ？

悩みが尽きないのはお肌のうるおい不足...

高分子のため美容液が肌に浸透しづらい！

高濃度の美容液を使っても改善されない...

美容成分によっては分子が大きすぎてコットンやハンドプレスではお肌の奥の角質層までは届きません。そうした成分は、ただ手で塗っただけでは蒸発してしまい肌の表面に残ってしまう場合があります。

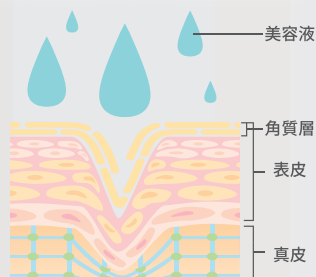


## あなたの「キレイ」を、もっと奥へ。 美容成分の浸透を強化×肌機能の活性化

お肌の奥へ\*、美容成分を届けるオクエ マジックボトル。(※角質層まで)

オクエ マジックボトルは、お手持ちの美容液をご使用できます。

ローラー部分はクッションタイプになっており、無理に押し当ててお肌を傷つける事はありません。軽く押し当てるだけで浸透効果の強化、適度な肌刺激を与え、お肌の悩みの改善に期待ができます。

※ローラーは角質層より下には届きません。

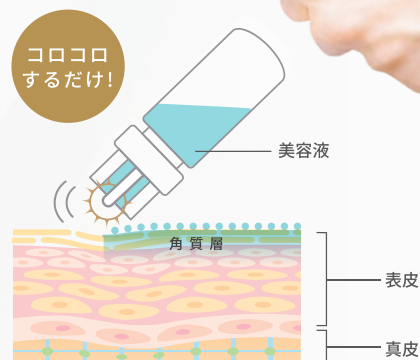

### POINT




#### 使い切り 10ml

一度に使い切れる小さなボトルでコンパクト。



#### 外して清潔を保つ

全部品、外して洗える。消毒で清潔を保つ。

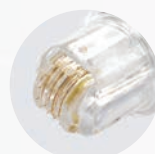

#### チタン製ローラー

金属アレルギーでもリスクが少なく安心。

### HOW TO

#### Step. 01



一度に使い切れる量の化粧水または美容液を入れて、しっかり蓋を閉めます。

#### Step. 02



お肌の気になる部分に優しくローラーを転がします。お肌に残った化粧水や美容液を手でなじませます。

#### Step. 03



ご使用後はボトルをしっかりと洗います。先端部分は消毒液等で洗浄し、清潔に保ってください。

[保管に関して]

※密閉状態にはなりませんので一度に使用できる容量のみを充填してください。

※エタノールでの消毒をおすすめしております。

[ご使用美容液について]

《推奨》無添加のヒアルロン酸/ペプチド/ビタミンC/EGF(成長因子)など  
《非推奨》パラベン(例:安息香酸)/防腐剤(フェノキシエタノールなど)/ヒドロキノン/コウジ酸/酸(AHA, BHA, グリコール酸)/フェノール

美しさを追求する“新感覚セルフエステ”

## OKUE®

MAGIC BOTTLE

オクエ マジックボトル

容量：10ml

定価：2,200円(税込2,420円)

商品コード B001800



※お肌の弱い方、肌トラブルを避けたい方はご使用をご遠慮ください。

※OKUE®は株式会社シンピシンの商標登録商品です。

[注意事項]

・ご使用毎に針が折れていないか、品質に異常はないか確認をお願いします。

・ご使用後はお肌が熱を持ち赤く火照る場合がございます。お肌に異常を感じる場合にはご使用をお控えください。

・ご使用時には紫外線カットを心がけていただくことをおすすめします。

WEBサイト



[お問い合わせ]

SHINBISHIN 株式会社 シンピシン

□大阪オフィス 大阪府大阪市浪速区元町1-5-7 ナンパラザビル8F  
TEL.06-6641-3500(代) / FAX.06-6641-3510

□東京オフィス 東京都千代田区神田須田町1-10-1 Y・S須田ビル8F

□福岡オフィス 福岡県福岡市中央区天神4-1-17 博多天神ビル4F

P2404