

キャップのシリーズとの接続方法

専用排液バッグ

ロック部分



キャップの
シリーズ
ストーマ袋

突起




キャップホルダー

- 1 キャップをキャップホルダーにはめる



- 2 排出口先端の突起の位置を確認する

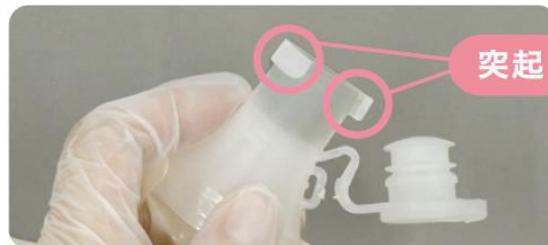

使用方法はこちらから

- 3 突起と突起の間の溝にロック部分がかみ合うようにコネクターを差し込む



突起と突起の
間の溝

ロック部分

- 4 時計回りにひねりロックする
(最後に軽く引っ張り、外れないか確認)



時計回り

ロック部分を突起にかぶせる

※キャップホルダーにはめなくてもコネクターの使用は可能です