



Japan Polymer Technology



JPTC練習用鉗子

Japan Polymer Technology



Shifting the view for new beginnings

低価格を実現した剛性のある
リユース鉗子

メリーランド
ハサミ鉗子
把持鉗子


全て高い評価をいただいています。



低価格帯のディスプレイ鉗子類

2018年販売開始以来、多くの先生方にご愛用頂いています。

メリーランド
ハサミ鉗子
把持鉗子
腸把持鉗子（方開き）

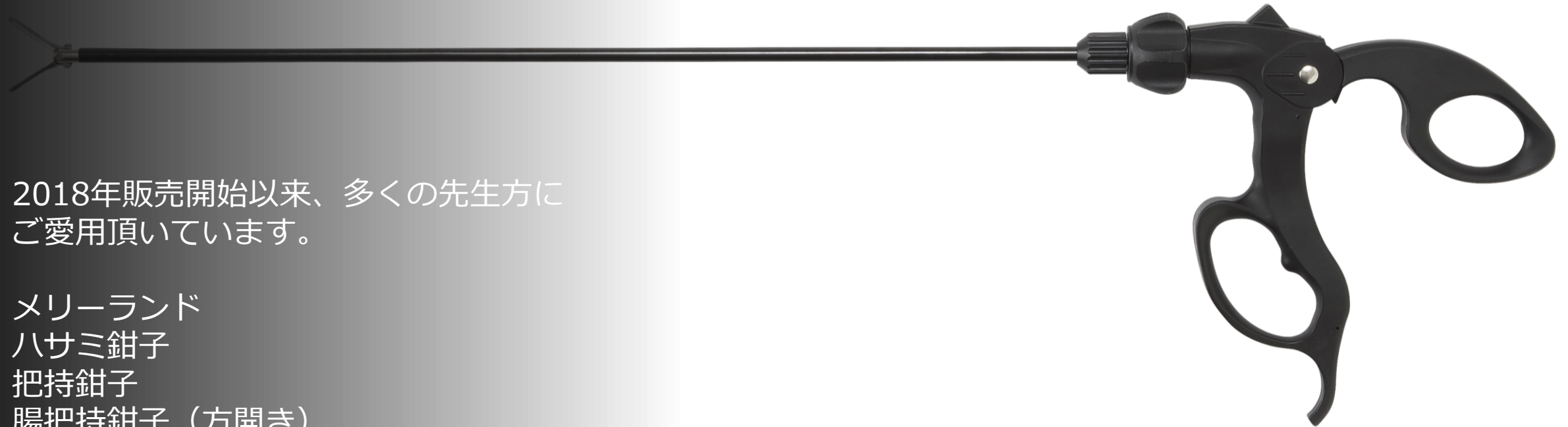

練習用鉗子 リユース

- 練習用メリーランド
JPTC-MAW
 - 練習用ハサミ鉗子
JPTC-SCW
 - 練習用把持鉗子
JPTC-GRW
- 各14,000円（送料・消費税別）

練習用鉗子 ディスポ

- 練習用メリーランド
JPTC-MA
 - 練習用ハサミ鉗子
JPTC-SC
 - 練習用把持鉗子
JPTC-GR
 - 練習用腸把持鉗子
JPTC-TG
- 各10,000円（送料・消費税別）



練習用鉗子 リユース

練習用メリーランド JPTC-MAW
 練習用ハサミ鉗子 JPTC-SCW
 練習用把持鉗子 JPTC-GRW

仕様	
ハンドル材料	ナイロン6製
シャフト有効長&直径	330mm Φ5mm
重量	154g
ラチェット	有
洗浄ポート	無
滅菌	ウェット使用后滅菌必要
使用制限	臨床では使用できません



練習用鉗子 ディスポ

練習用メリーランド JPTC-MA

練習用ハサミ鉗子 JPTC-SC

練習用把持鉗子 JPTC-GR

練習用腸把持鉗子 (片開き) JPTC-TG

仕様

ハンドル材料	ナイロン6製
シャフト有効長&直径	330mm Φ5mm
重量	127g
ラチェット	無
洗浄ポート	無
使用制限	臨床では使用できません





練習用鉗子類についてのご注意

臨床では使用できません

ハンドルと鉗子を分解しないでください

リユース鉗子類において、ハンドルが開きにくくなっている時や把持部が開きにくい時は、黒いシャフト内部の金具が緩んでいることがあります。その際は把持部を時計回りに回して締めてください

落下させると破損します。落下しないところへ保管してください

ドライボックスへ差しっぱなしにしないでください

練習後は先端部にキャップを付けてください

お子様の手の届かない場所に保管してください

洗浄ポート付きでウェットでの練習後は必ず適切に滅菌をしてください

練習用鉗子類の品質確認事項

ローテートダイヤルの動作確認

ハンドルの操作及びジョーの開閉を確認

シャフト部分及びハンドルにひびや欠損の有無を確認

ハンドルにNot for Medical Useのシールの有無を確認

先端部のジョーにキャップを付けて保護

リユース鉗子類の洗浄ポートにゴムキャップ装着の確認

品質合格品は緩衝材で梱包

Japan Polymer Technology



Shifting the view for new beginnings

お問い合わせ

日本高分子技研株式会社

〒103-0027

東京都中央区日本橋3-2-14


日本橋KNビル4階

電話：03-5201-3735

井上雅司 inoue@jptc.co.jp



Official site

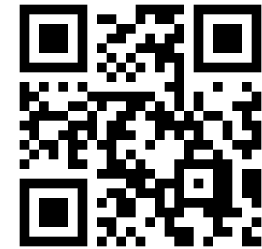

JPTC Shop